

## ErgoGruppebord

Brugermanual

Montageanvisning

Service manual



**Denne folder skal altid opbevares ved produktet**

## Indholdsfortegnelse

1. Tekniske data .....	3
2. Introduktion .....	4
3. Overensstemmelse med EU-direktiv .....	4
4. Anvendelse.....	4
5. Komponentliste.....	5
6. Montagevejledning .....	7
7. Højdejustering af bord .....	10
8. Funktionsafprøvning .....	11
9. Sikker anvendelse.....	11
10. Rengøring/ vedligeholdelse .....	12
11. Fejlsøgning .....	13
12. Tilbehør .....	13
13. CE-erklæring.....	14
14. Reklamation .....	15

## 1. Tekniske data

<b>Produktnavn:</b>	<b>ErgoGruppebord</b>
<b>Varenummer:</b>	<b>Højde 56-90cm incl. bordplade</b> 165x100cm: 20-71116 200x100cm: 20-71120 240x100cm: 20-71124
<b>Højdeindstilling:</b>	Manuelt
<b>Materiale:</b>	Stål St. 37 Div. Kunststofemner
<b>Bordplade:</b>	Laminat
<b>Overfladebehandling:</b>	Pulverlakering Chromating
<b>Maks. belastning på stel (statisk):</b>	100 kg jævnt belastet over hele bordpladen
<b>Maks. løftekraft ved højdeindstilling (dynamisk):</b>	50 kg
<b>Garanti:</b>	Se reklamation side 15
<b>Producent:</b>	Ropox A/S, DK-4700 Næstved, Tlf.: +45 55 75 05 00  E-mail: <a href="mailto:info@ropox.dk">info@ropox.dk</a> , <a href="http://www.ropox.dk">www.ropox.dk</a>

## 2. Introduktion

ErgoGruppebord er navnet på det nye højdeindstillelige bordprogram fra Ropox.

Vores ErgoGruppeborde er egnet og ideelt til vidt forskellige aktiviteter.

ErgoGruppebordets funktionelle design er skabt til mennesker, som bevæger sig med eller uden hjælpemidler.



Dette dokument SKAL altid følge produktet samt være læst og til rådighed

Korrekt anvendelse, betjening og inspektion er afgørende for effektivt og sikkert arbejde.



Dette produkt er højdeindstilleligt, og der er derfor risiko for klemningsfare. Enhver betjening skal ske af eller under kyndig vejledning af en voksen, som har læst og forstået vigtigheden af afsnit 9 "Sikker anvendelse"

## 3. Overensstemmelse med EU-direktiv

Dette produkt er CE-mærket og forsikres derved at være i overensstemmelse med de grundlæggende krav vedr. funktion og sikkerhed inden for de aktuelle direktiver. Se separat CE erklæring side 14.

## 4. Anvendelse

Vores ErgoGruppebord er designet til at opnå en for brugeren optimal arbejdshøjde. Det er et aktivitetsbord og må derfor ikke benyttes som løftebord eller personløfter.

Anvendelsen skal ske indendørs, under normal rumtemperaturer og fugtighed i boligen.

## 5. Komponentliste

Bensektion 1 stk.




Fod 2 stk.

(Moneret med stilleskruer)



Bordplade 1 stk.

(Moneret med overramme)

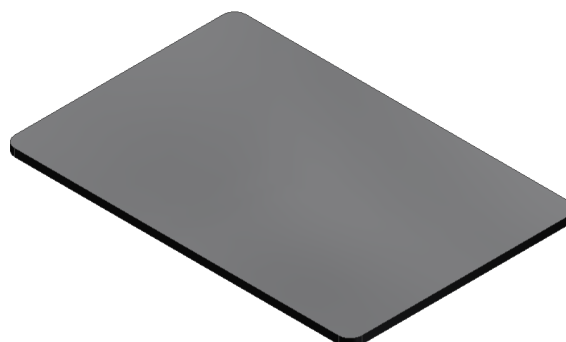

Insex skrue M8x35 95010835: 8 stk.



Udtagsaksel: \_\_\_\_\_ 2 stk.



Lejeophæng: \_\_\_\_\_ 2 stk.




Spånpladeskrue 5x20: \_\_\_\_\_ 4 stk.



Stopring: \_\_\_\_\_ 2 stk.



Kravebøsning: \_\_\_\_\_ 2 stk.


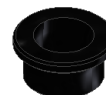


Håndsving : \_\_\_\_\_ 1 stk.




## 6. Montagevejledning

### 1. Montage af bensektion på bordplade med overramme

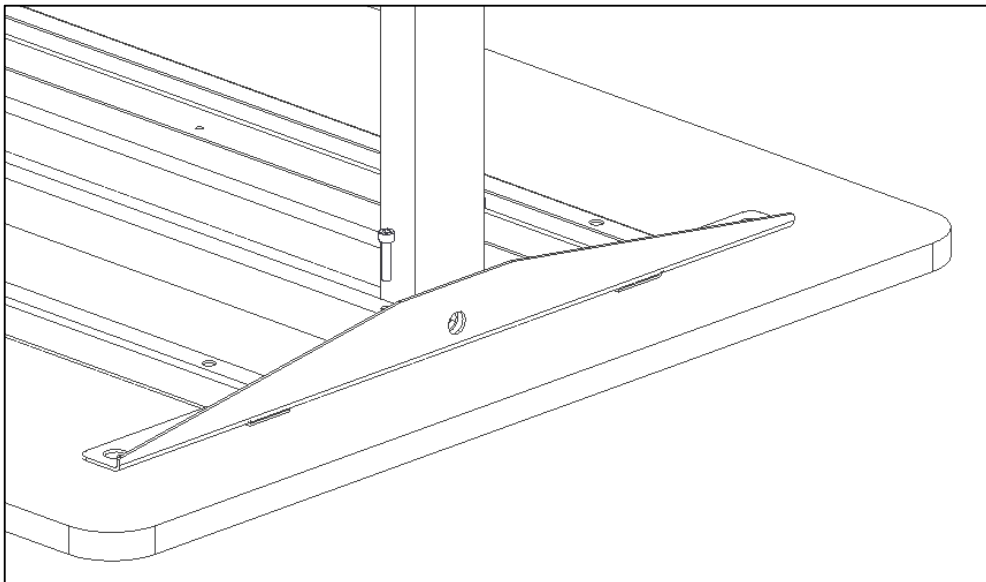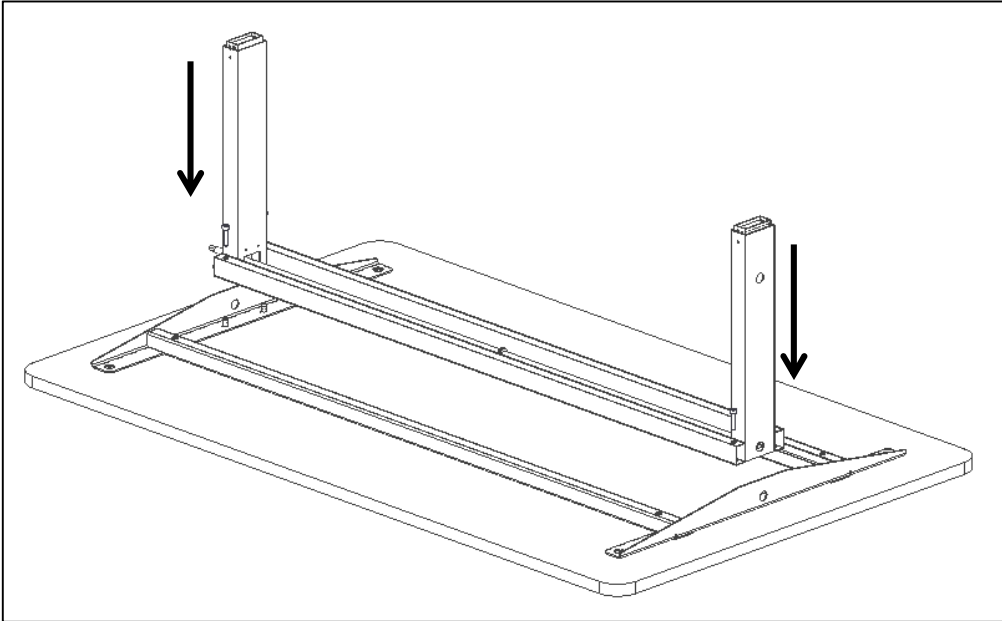


4x  M8x35

## 2. Montage af fødder


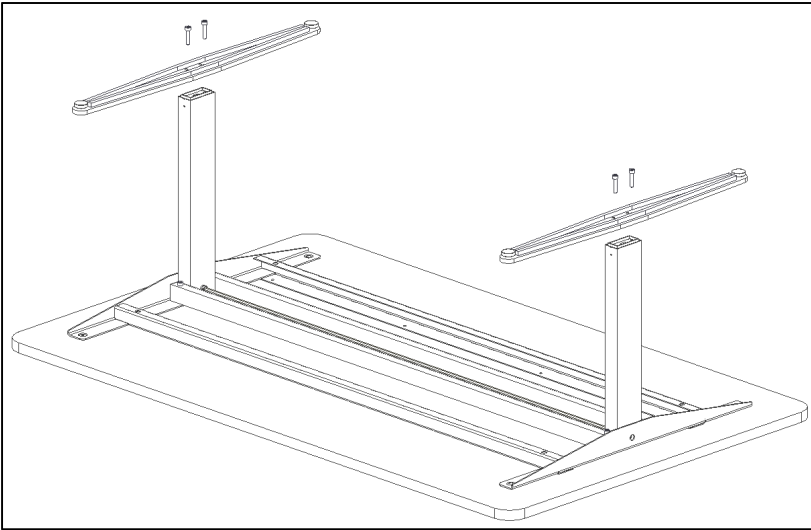


4 X  M8x35

## 3. Montage af udtagsaksel og lejeophæng

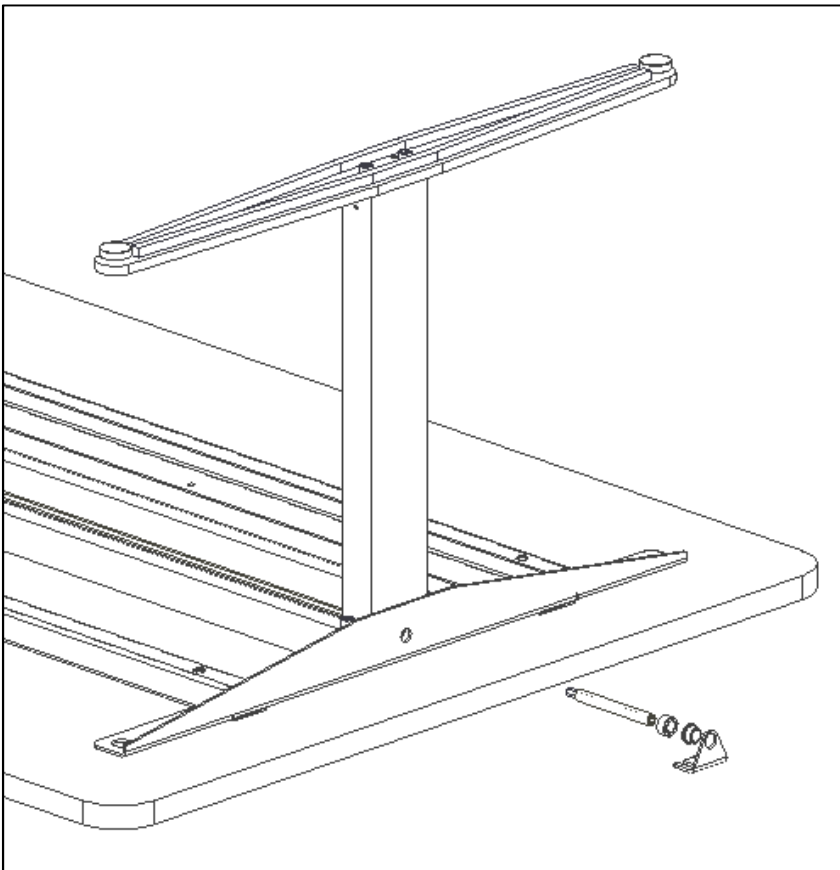




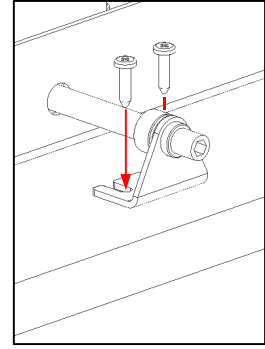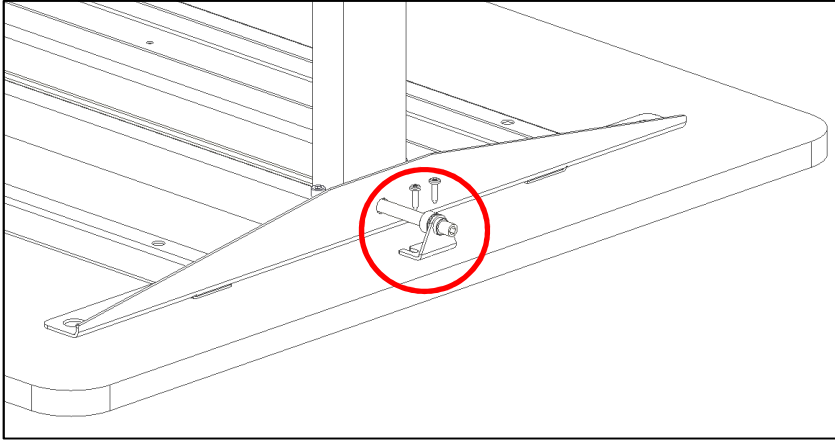


4 X 

## 7. Højdejustering af bord

### 1. Montage af håndtag

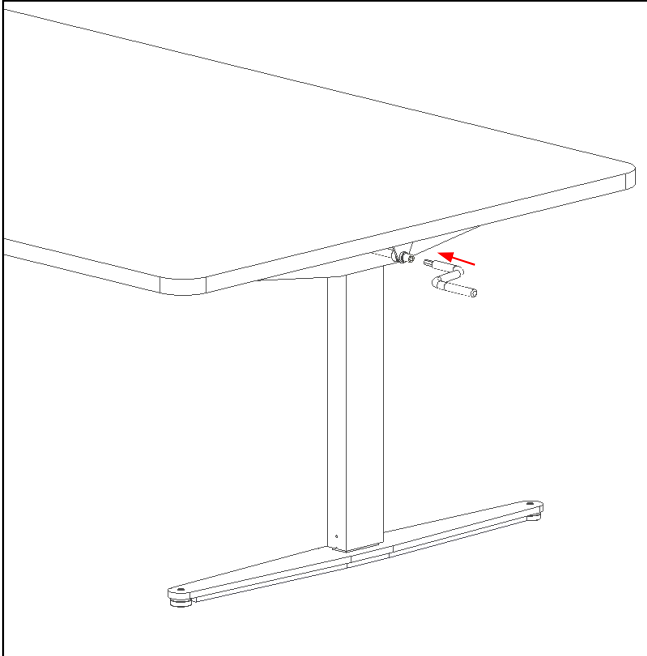

Højdeindstillingen udføres ved at dreje manuelt på håndtaget i bordets side. Ved at dreje højre om på håndsvinget, vil bordet køre op.

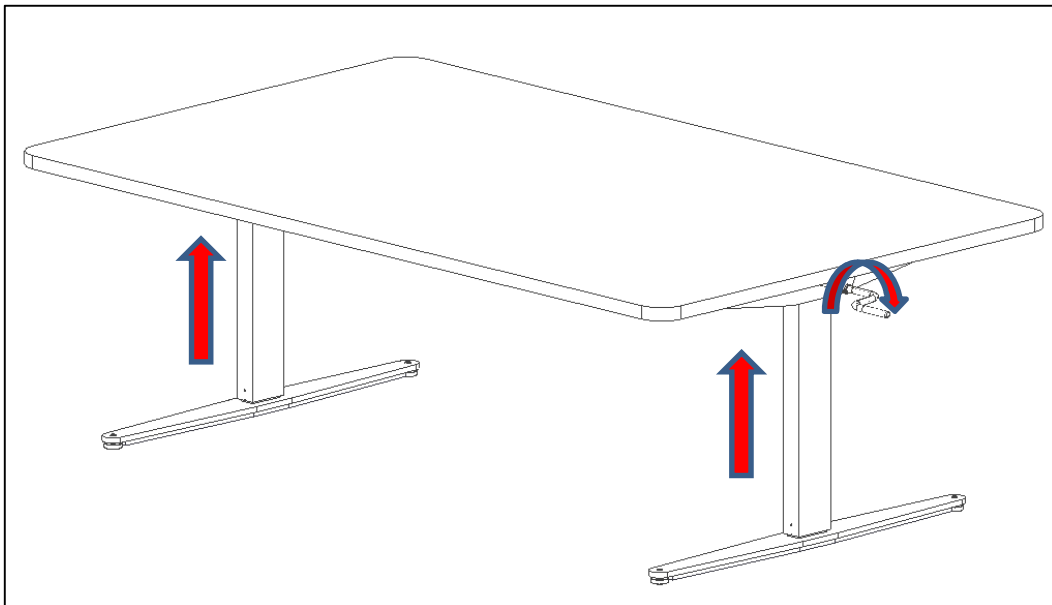

## 8. Funktionsafprøvning

Efter afsluttet installation og inden bordet tages i brug, skal der altid udføres en komplet afprøvning af alle funktioner på bordet. Derefter skal der udføres funktionsafprøvning mindst én gang om året af kompetent personale:

1. Kontroller at montagevejledningen er overholdt.
2. Kontroller at alle boltforbindelser er fastspændt.
3. Der må ikke være belastning på bordet.
4. Der må ikke være genstande el. lign., som kan hindre bordet i at bevæge sig indenfor højdeindstillingsintervallet.
5. Placer håndsvinget som vist i betjeningsvejledningen og køр bordet i bundposition. Check at bevægelsen sker på en jævn og kontrolleret måde.
6. Køр derefter bordet i øverste position, og check at dette sker på en jævn og kontrolleret måde.

Er alle ovennævnte punkter kontrolleret, kan De nu benytte bordet.  
Se "Sikker anvendelse afsnit 9".

## 9. Sikker anvendelse

- ErgoGruppebord må kun anvendes af personer, som har læst og forstået denne instruktion.
- ErgoGruppebord er et aktivitetsbord og må ikke benyttes som løftebord eller som personløfter.
- Enhver anvendelse skal ske på en sådan måde, at risikoen for skader på personer eller ejendom ikke opstår. Det er den person, som betjener bordet, der har ansvaret for, at ingen kommer til skade.
- Vær opmærksom på friplads over og under bordet, så bordet frit kan justeres i højden.
- Bordet må ikke betjenes, såfremt der er opstået fejl eller skader.
- Overbelast ikke bordet og vær sikker på, at belastningsfordelingen er korrekt.
- Ved inspektioner, service eller reparationer skal bordet frigøres for last.
- Enhver forandring, som kan påvirke bordets virkemåde eller opbygning, er ikke tilladt.
- Installation, service og reparationer må kun udføres af personale, som har tilstrækkelig kompetence.
- Såfremt monteringen af bordet ikke er udført ifølge denne montageanvisning, kan garantien ophæves.
- Kun Ropox's originale reservedele må benyttes ved udskiftning af dele. Benyttes andre reservedele kan garantien ophæves.

## 10. Rengøring/ vedligeholdelse

### 10.1 Rengøring af stel

Stellet må tørres med en opvredet klud med lunkent vand og almindelige rengøringsmidler. Det er ikke tilladt at benytte ætsende/ slibende væsker eller slibende klude, børster og svampe.

Efter rengøring skal stellet aftørres, så det ikke er fugtigt.

### 10.2 Rengøring af bordplade, laminat

Laminatpladen rengøres med en blød klud hårdt opvredet i varmt vand evt. tilsat flydende opvaskemiddel uden sulfo, da dette med tiden giver en fedtet overflade. Pletter, der ikke kan fjernes med vand, kan ofte fjernes med lige dele klorin og vand eller med acetone. Ved brug af disse rengøringsmidler skal De sørge for udluftning og være opmærksom på, at bordstellet ikke tåler berøring med disse midler.

Pletter efter spritskrivere fjernes ved hjælp af almindeligt husholdningssprit. Blyantskrift fjernes ved hjælp af et almindeligt stykke blødt viskelæder. Visse kemikalier, blæk samt stærkt farvende frugtsafter kan, hvis det sidder i længere tid på pladen, give misfarvning, fordi farvepigmenterne binder sig til overfladen.

Brug aldrig ståluld, skurepulver og lignende slibende materialer eller rengøringsmidler, der afsætter en hinde på overfladen, f.eks. brun sæbe.

Efter hver rengøring anbefales det, at vaske af med en klud opvredet i rent vand, herefter aftørring med en tør klud.

### 10.3 Vedligeholdelse



Inspektioner, service og reparationer skal udføres af kompetent personale

Bordet er vedligeholdelsesfrit. Smøring af bevægelige dele er foretaget for stallets levetid. Af sikkerhedsmæssige og driftsmæssige årsager anbefaler vi et årligt eftersyn af stallet:

- Kontroller at alle boltsamlinger er fastspændt.
- Kontroller at bordet frit og uhindret kan bevæge sig fra nederste position og til øverste position uden problemer.

Kun Ropox's originale reservedele må benyttes ved udskiftning af dele. Benyttes andre reservedele kan garantien ophæves.

## 11. Fejlsøgning

### 11.1 Bordet virker løst eller ustabil

- Skruerne, der holder stellet sammen, er ikke spændt ordentligt.
- Efterspænd alle stallets skruer, jævnfør montagevejledning.

### 11.2 Bordet kan ikke justeres i højden (virker meget svært at justere)

- Check at der ingen belastning er på bordet.
- Check bordet for fysisk overlast eller fysiske skader.

## 12. Tilbehør

Bremsehjul:

V-nr. 20-50340



## 13. CE-erklæring

### ErgoGruppebord

<u>Type</u>	<u>Højde 56-90 cm</u>
165x100cm	20-71116
200x100cm	20-71120
240x100cm	20-71124

er i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder:

### DIREKTIVER


Rådets direktiv 93/42/EØF af 14. juni 1993 om medicinske anordninger

### STANDARDER

DS/EN ISO 12182: 2012

DS/EN ISO 14971: 2001

Dato: 01.12.14

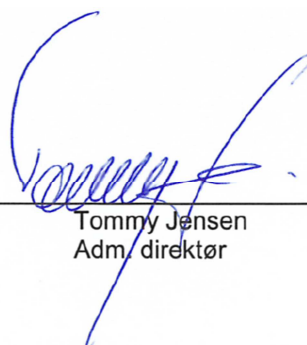

Tommy Jensen  
Adm. direktør

## 14. Reklamation

Se generelle salgs- og leveringsbetingelser på [www.ropox.dk](http://www.ropox.dk)





# ErgoGrouptable



User Manual

Mounting Instructions

Service Manual

**Keep this manual with the product at all times**



## Contents

1. Technical data .....	18
2. Introduction .....	19
3. Conformity with EU Directive .....	19
4. Application .....	19
5. List of components.....	20
6. Mounting instructions.....	22
7. Height adjustment of table .....	25
8. Performance test .....	26
9. Safety in use .....	26
10. Cleaning/ maintenance .....	27
11. Fault finding .....	28
12. Accessories .....	28
13. CE declaration .....	29
14. Complaint.....	30

## 1. Technical data

<b>Product name:</b>	<b>ErgoGrouptable</b>
<b>Item numbers:</b>	<b>Height 56-90cm incl. tabletop</b> 165x100cm: 20-71116 200x100cm: 20-71120 240x100cm: 20-71124
<b>Height adjustment:</b>	56-90 cm (manual) incl. tabletop
<b>Material:</b>	Steel St. 37 Various plastic components
<b>Tabletop:</b>	Laminate
<b>Surface treatment:</b>	Powder coating Chromate
<b>Max. load on frame (static):</b>	100 kg evenly distributed over the tabletop
<b>Max. lifting power during height adjustment (dynamic):</b>	50 kg
<b>Complaint:</b>	See Complaint page 30
<b>Manufacturer</b>	Ropox A/S, DK-4700 Næstved, Tel.: +45 55 75 05 00 e-mail: <a href="mailto:info@ropox.dk">info@ropox.dk</a> , <a href="http://www.ropox.dk">www.ropox.dk</a>

## 2. Introduction

ErgoGrouptable is the name of the new height-adjustable table program from Ropox.

The ErgoGrouptable and accessories are ideal for a variety of activities.

The ErgoGrouptable has a functional design developed for people moving around with or without assistive devices, for bookworms, computer freaks or playing children.



This manual must ALWAYS accompany the product, be read by and available to the user.

Correct use, operation and inspection are decisive factors for efficient and safe performance.



This product is height-adjustable and there is therefore a crushing hazard. The height adjustment must be carried out by or under the supervision of an adult, who has read and understood the importance of Section 9 "Safety in use"

## 3. Conformity with EU Directive

This product has CE marking and is thus in accordance with the basic requirements concerning functionality and safety of the current EU Directive. See separate CE declaration page 14.

## 4. Application

The ErgoGrouptable is designed with a view to obtaining optimum working height for the user. It is an activity table and must not be used as a lifting table or person lifter.

The table is intended for indoor use under normal room temperatures and humidity.


## 5. List of components

Leg section \_\_\_\_\_ 1 pc.




Foot \_\_\_\_\_ 2 pcs.

(Provided with adjustment screws)

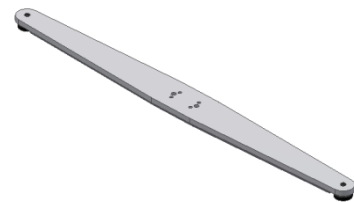

Tabletop \_\_\_\_\_ 1 pc.

(Provided with brackets)

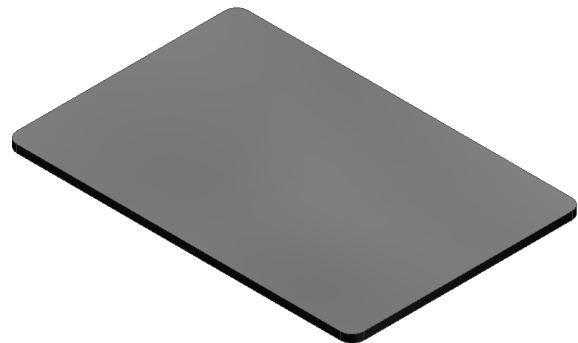

Insex screw M8x35 950100835: \_\_\_\_\_ 8 pcs.



Extension bracket : \_\_\_\_\_ 2 pcs.



Bearing suspension : \_\_\_\_\_ 2 pcs.




Chipboard screw 5x20 : \_\_\_\_\_ 4 pcs.



Stop ring: \_\_\_\_\_ 2 pcs.



Sleeve bushing: \_\_\_\_\_ 2 pcs.


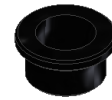


Handle : \_\_\_\_\_ 1 pc.



## 6. Mounting instructions

### 1. Mounting of leg section on tabletop

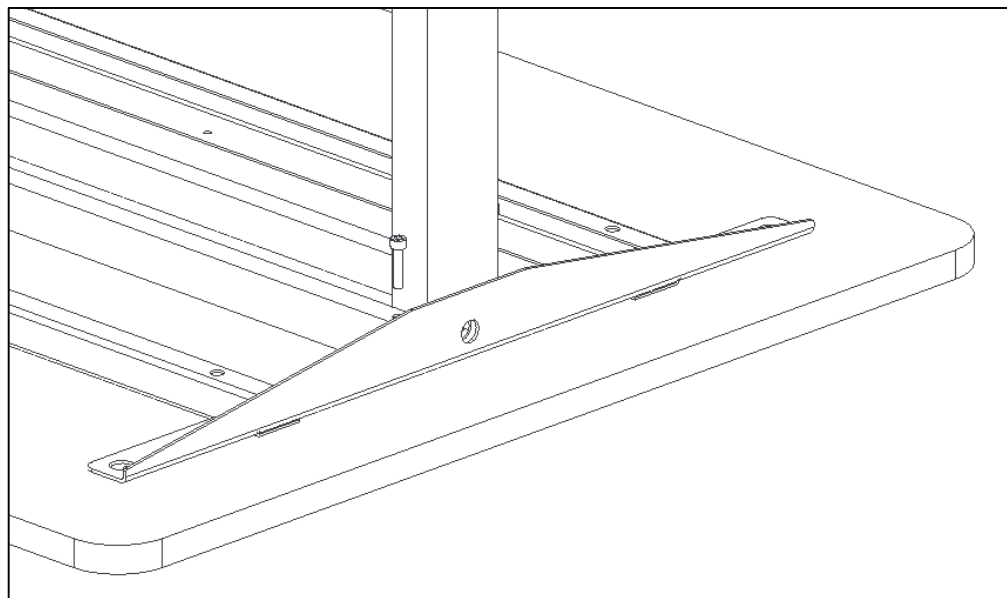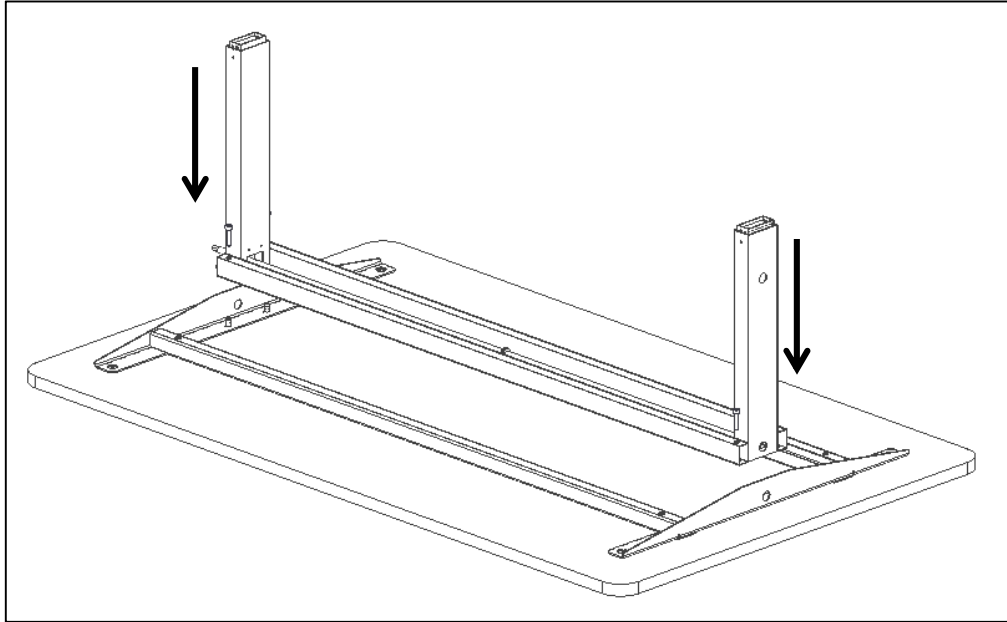


4x




M8x35



**2. Mounting of feet**

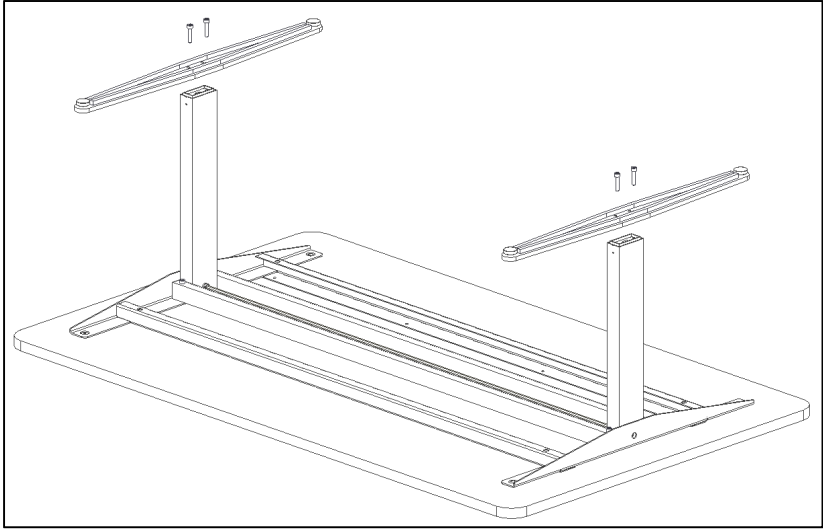

4 X  M8x35

**3. Mounting of Extension bracket**

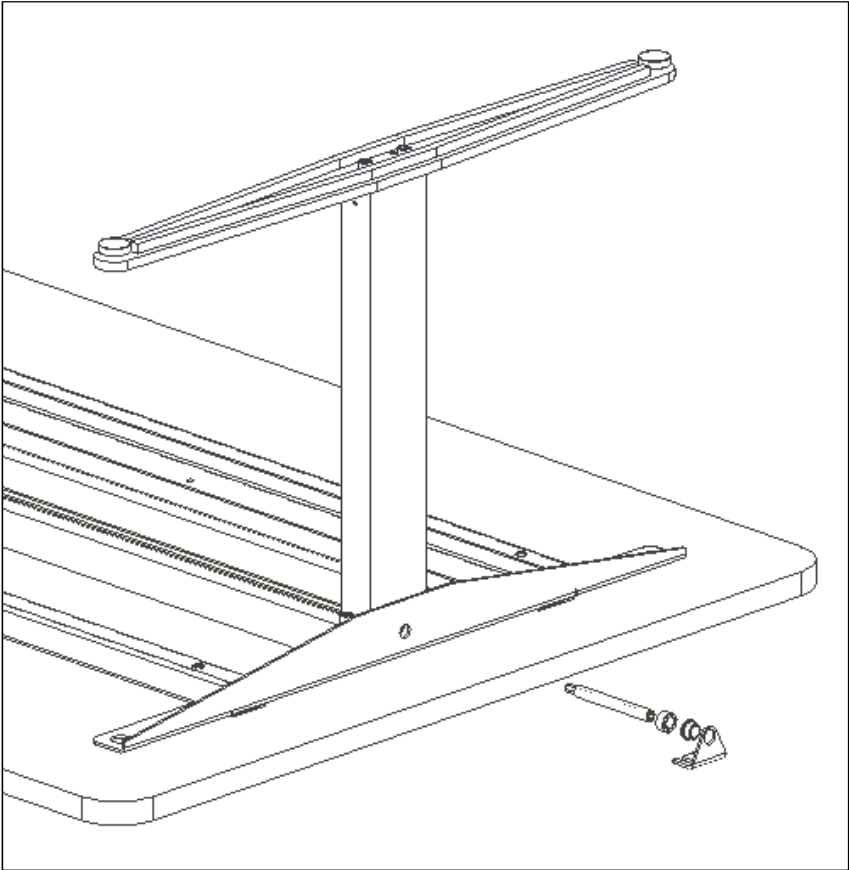

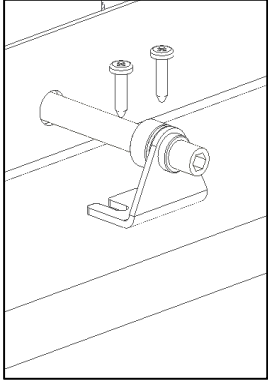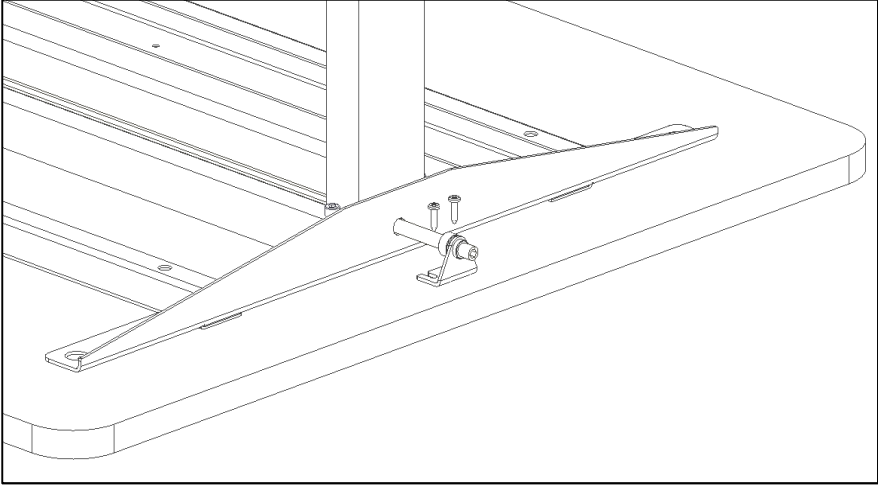

4 X





## **7. Height adjustment of table**

### **1. Mounting of handle**

**The height is adjusted by turning the handle on the side of the table manually. When turning the handle clockwise, the table will move upward.**

## 8. Performance test

After completed installation and before use, all functions of the table must be tested. After that, a performance test must be carried out at least once a year by competent personnel.

7. Check that the mounting instructions have been observed.
8. Check that all bolts have been tightened.
9. Make sure that there is no load on the table.
10. Make sure that there are no objects or the like preventing the table from moving unhindered within the range of height adjustment.
11. Place the handle as illustrated in the manual and adjust the table to bottom position. Check that the movement is even and smooth.
12. Now adjust the table to top position and check that the movement is even and smooth.

When these tests have been carried out successfully, the table is ready for use.  
See "Safety in use", Section 9.

## 9. Safety in use

- The ErgoGrouptable must only be used by persons, who have read and understood these instructions.
- The ErgoGrouptable is an activity table and must not be used as a lifting table or person lifter.
- Always use the table in a manner excluding the risk of damage to persons or property. The person operating the table is responsible for avoiding damage or injury.
- Make sure that there is free space above and below the table to allow height adjustment.
- Do not operate the table in case of defects or damage.
- Do not overload the table and ensure that the load distribution is correct.
- During inspections, service or repairs any load must be removed from the table.
- Modifications, which may influence the performance or design of the table, are not allowed.
- Assembly, service and repairs must be carried out by competent personnel.
- If the table has not been assembled according to these mounting instructions, the guarantee may become void.
- Only use Ropox original spare parts for replacement. If other spare parts are used, the guarantee may become void.

## **10. Cleaning/ maintenance**

### **10.1 Cleaning of frame**

Wipe the frame with a wrung cloth with lukewarm water and a mild detergent. Do not use enchants or abrasives or grinding cloths, brushes or sponges.

After cleaning, dry the frame.

### **10.2 Cleaning of tabletop, laminate**

Clean the laminate tabletop with a soft cloth wrung in hot water with a liquid detergent, which is not sulfonated, as this will result in a greasy surface. Stains that cannot be removed with water may often be removed with equal parts chlorine and water or with acetone. When using these materials, be aware of airing of the room and make sure that the frame does not get in touch with these cleaning materials.

Stains from felt-tip pens may be removed by means of ordinary denatured alcohol. Pencil strokes should be removed with a piece of rubber. Certain chemicals, ink and strongly coloured fruit juices may – if they are left on the tabletop for a longer period – result in discoloration as the colour pigments stick to the surface.

Never use steel wool, scouring powder or cleaning materials, which leave a film on the surface, e.g. yellow soap.

After cleaning, it is recommendable to wash the surface with a cloth wrung in clean water and dry with a soft cloth.

### **10.3 Maintenance**

The frame is maintenance-free and moving parts have been lubricated for life. For reasons of safety and reliability, we recommend inspection of the frame once a year:

- Check that all bolts have been securely fastened.
- Check that the table moves from bottom to top position without problems.

Only use Ropox original spare parts for replacement. If other spare parts are used, the guarantee may become void.

## **11. Fault finding**

### **11.1 The table seems loose or unstable**

- The assembly screws have not been securely tightened.
- Retighten all screws, cf. mounting instructions.

### **11.2 The height/tilting cannot be adjusted (adjustment is very difficult)**

- Check that there is no load on the table.
- Check the table for physical overloading or damage.

## **12. Accessories**

Castors:

Item No. 20-50340

## 13. CE declaration

### ErgoGrouptable

<u>Type</u>	<u>Height 56-90 cm</u>
160x100 cm	20-71116
200x100 cm	20-71120
240x100 cm	20-71124

Are in accordance with the following directive and standards:

### DIRECTIVES

Council directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices

### STANDARDS

DS/EN ISO	12182:	2012
DS/EN ISO	14971:	2001

Dato: 01.12.14

## **14. Complaint**

See General Terms of Sale and Delivery on [www.ropox.dk](http://www.ropox.dk)



## Inhaltsverzeichnis

1. Technische Daten .....	33
2. Einleitung .....	34
3. Übereinstimmung mit EU Richtlinie.....	34
4. Anwendung .....	34
5. Komponentenliste.....	35
6. Montageanleitung.....	37
7. Höhenverstellung des Tisches.....	40
8. Funktionsprüfung.....	41
9. Hinweise zur Sicherheit.....	41
10. Reinigung/ Wartung.....	42
12. Zubehör .....	43
13. CE-Erklärung.....	44
14. Reklamation .....	45



# 1. Technische Daten

<b>Produktname:</b>	<b>Ergo Gruppentisch</b>
<b>Warennummer:</b>	<b>Höhe 56-90cm einschl. Tischplatte</b>  165x100cm: 20-71116 200x100cm: 20-71120 240x100cm: 20-71124
<b>Höhenverstellung:</b>	Manuell
<b>Materialien:</b>	Stahl St. 37 Verschiedene Kunststoffteile
<b>Tischplatte:</b>	Laminat
<b>Oberflächenbehandlung:</b>	Pulverlackierung Chromat
<b>Max. Belastbarkeit des Rahmens (statisch):</b>	100 kg auf der Tischplatte gleichmäßig verteilt
<b>Max. Hebekraft bei Höhenverstellung (dynamisch):</b>	50 kg
<b>Reklamation:</b>	Siehe Reklamation Seite 45
<b>Hersteller:</b>	Ropox A/S, DK-4700 Næstved, Tel.: +45 55 75 05 00 E-Mail: <a href="mailto:info@ropox.dk">info@ropox.dk</a> , <a href="http://www.ropox.dk">www.ropox.dk</a>

## **2. Einleitung**

ErgoGruppentisch ist der Name des neuen höhenverstellbaren Tischprogramms von Ropox.

Die ErgoGruppentische sind für viele verschiedene Aktivitäten ideal.

Der ErgoGruppentisch hat ein funktionelles Design, entwickelt für Menschen, die sich mit oder ohne Hilfsmittel bewegen, sowie für Leseratten, Computer Freaks oder spielende Kinder

Korrekte Anwendung, Bedienung und Funktionsprüfung sind für die effektive und sichere Funktion entscheidende Faktoren.

## **3. Übereinstimmung mit EU Richtlinie**

Dieses Produkt hat eine CE-Kennzeichnung und entspricht somit den grundlegenden Anforderungen betreffend Funktion und Sicherheit der geltenden Richtlinien. Siehe separate CE-Erklärung, Seite 14.

## **4. Anwendung**

Der ErgoGruppentisch ist im Hinblick auf die Erreichung einer für den Benutzer optimalen Arbeitshöhe entwickelt worden. Er ist ein Aktivitätstisch und darf deshalb nicht als Hebetisch oder Personenlifter benutzt werden.

Die Anwendung muss innen bei normalen Temperaturen und Feuchtigkeit der Wohnung erfolgen.

## 5. Komponentenliste

Beinsektion 1 Stück

Fuss 2 Stück

(mit Stelleschrauben montiert)

Tischplatte 1 Stück

(mit Trägern versehen)

Insex Schraube M8x35 95010835 8 Stück

Kurbelverlängerung 2 Stück

Lageraufhängung 1 Stück

Spånplatteschraube 5x20: 4 Stück.

Haltering: 2 Stück.

FlanschrBuchse 2 Stück.

Kurbel 97100-002: 1 stück.

## **6. Montageanleitung**

### **1. Montage der Beinsektion auf der Tischplatte**

## **2. Montage der Füße**

## **3. Montage des Kurbelverlängerung und des Lageraufhängung**



## **7. Höhenverstellung des Tisches**

### **1. Montage der Kurbel**

**Die Höhenverstellung erfolgt durch manuelles Drehen der Kurbel auf der Seite des Tisches. Durch Drehen der Kurbel im Uhrzeigersinn, wird sich der Tisch nach oben bewegen.**



## 8. Funktionsprüfung

Nach beendigter Montage und vor Ingebrauchnahme muss eine komplette Überprüfung aller Funktionen des Tisches durchgeführt werden. Eine Funktionsprüfung ist danach mindestens einmal jährlich von kompetentem Personal durchzuführen:

13. Sicherstellen, dass die Montageanleitung befolgt wurde.
14. Überprüfen, ob alle Bolzen fest angezogen sind.
15. Sicherstellen, dass der Tisch nicht belastet ist.
16. Sicherstellen, dass keine Gegenstände die Bewegung des Tisches innerhalb des Höhenverstellbereiches hindern.
17. Die Kurbel wie in der Bedienungsanleitung gezeigt anbringen und den Tisch in die untere Position verstellen. Sicherstellen, dass die Bewegung gleichmäßig und ruhig erfolgt.
18. Danach den Tisch in die obere Position verstellen und sicherstellen, dass die Bewegung gleichmäßig und ruhig erfolgt

Nach erfolgreicher Durchführung dieser Funktionsprüfung kann der Tisch in Gebrauch genommen werden. Siehe „Hinweise zur Sicherheit“, Abschnitt 9.

## 9. Hinweise zur Sicherheit

- Der ErgoGruppentisch darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben.
- Der ErgoGruppentisch ist ein Aktivitätstisch und darf nicht als Hebetisch oder Personenlifter verwendet werden.
- Den Tisch immer so verwenden, dass Schäden an Personen oder Gegenständen vermieden werden. Die Person, die den Tisch bedient, ist für die Vermeidung von Schäden oder Verletzungen verantwortlich.
- Sicherstellen, dass über und unter dem Tisch für die Höhenverstellung genügend Platz vorhanden ist.
- Nicht den Tisch bei Fehlern oder Schäden verwenden.
- Nicht den Tisch überlasten und sicherstellen, dass die Belastungsverteilung korrekt ist.
- Bei Funktionsprüfungen, Wartung oder Reparaturen darf der Tisch nicht belastet sein.
- Änderungen, die auf die Funktion oder den Aufbau des Tisches einwirken können, sind nicht gestattet.
- Montage, Wartung und Reparaturen dürfen nur von kompetentem Personal ausgeführt werden.
- Ist die Montage nicht gemäß dieser Anleitung ausgeführt worden, kann die Garantie ihre Gültigkeit verlieren.
- Nur Ropox Original-Ersatzteile verwenden. Werden andere Ersatzteile benutzt, kann die Garantie ihre Gültigkeit verlieren.

## **10. Reinigung/ Wartung**

### **10.1 Reinigung des Rahmens**

Den Rahmen mit einem gewrungenen Lappen mit lauwarmem Wasser und einem handelsüblichen Reinigungsmittel reinigen. Nicht Ätz- oder Schleifmittel oder schleifende Lappen, Bürsten oder Schwämme verwenden.

Nach Reinigung den Rahmen abtrocknen.

### **10.2 Reinigung der Tischplatte, Laminat**

Die Laminatplatte mit einem weichen, in warmem Wasser gewrungenen Lappen mit einem nicht sulfonierten Spülmittel reinigen, da sulfonierte Spülmittel eine fettige Oberfläche ergeben. Flecke, die sich nicht mit Wasser entfernen lassen, können oft mit 50/50 Chlor und Wasser oder mit Aceton entfernt werden. Werden diese Mittel verwendet, muss der Raum gelüftet werden. Bitte beachten, dass der Tischrahmen mit diesen Mitteln nicht in Berührung kommen darf.

Flecke von Filzschreibern werden mit denaturiertem Spiritus entfernt. Bleistiftstriche sind mit einem weichen Radiergummi zu entfernen. Gewisse Chemikalien, Tinte und stark färbende Fruchtsäfte können nach einiger Zeit Verfärbung ergeben, weil sich die Farbpigmente an die Oberfläche binden.

Nie Stahlwolle, Scheuerpulver und ähnliche schließende Materialien oder Reinigungsmittel verwenden, die auf der Oberfläche ein Häutchen hinterlassen, wie z.B. Schmierseife.

Es empfiehlt sich, nach Reinigung das Laminat mit einem in reinem Wasser gewrungenen Lappen zu waschen und danach mit einem trockenen Lappen abzutrocknen.

### **10.3 Wartung**

Der Tisch ist wartungsfrei. Bewegliche Teile des Rahmens sind dauergeschmiert. Aus Sicherheits- und Betriebssicherheitsgründen empfehlen wir eine jährliche Überprüfung des Rahmens:

- Überprüfen, ob alle Bolzen fest angezogen sind.
- Überprüfen, ob sich der Tisch ohne Probleme von der unteren bis zur oberen Position bewegt.

Nur Ropox Original-Ersatzteile verwenden. Werden andere Ersatzteile benutzt, kann die Garantie ihre Gültigkeit verlieren.

# 11. Fehlersuche

## 11.1 Der Tisch ist locker oder instabil

- Die Bolzen, die den Tisch zusammenhalten, sind nicht fest angezogen.
- Alle Bolzen des Rahmens nachziehen, vgl. Montageanleitung.

## 11.2 Der Tisch kann nicht in der Höhe verstellt/schräggestellt werden, Verstellung ist sehr schwierig

- Sicherstellen, dass der Tisch nicht belastet ist.
- Den Tisch auf physische Überlastung oder physische Schäden überprüfen.

# 12. Zubehör

Bremsräder:

Warennummer 20-50340

## 13. CE-Erklärung

### ErgoGruppentisch

<u>Typ</u>	<u>Höhe 56-90 cm</u>
165x100 cm	20-71116
200x100 cm	20-71120
240x100 cm	20-71124

entspricht den untenstehenden Richtlinien und Normen:

#### RICHTLINIEN

Council directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices

#### NORMEN

DS/EN ISO 12182: 2012

DS/EN ISO 14971: 2001

Dato: 01.12.14

## **14. Reklamation**

Siehe Allgemeine Verkaufs- und Lieferungsbedingungen auf [www.ropox.dk](http://www.ropox.dk)