

CuroCell[®] A4 OP10

CuroCell[®] A4 CX10

CuroCell[®] A4 CX15

CuroCell[®] A4 CX16

CuroCell[®] A4 CX20

Automatiske luftmadrasser

Artikkelnummer for bruksanvisning: 95-001430-NO0000



Innhold

ADVARSLER OG SIKKERHETSFORANSTALTNINGER	3
1. Innledning	4
2. Montering/Installering	5
3. Bruk.....	6
4. Produktbeskrivelse.....	11
5. Rengjøring og rekondisjonering.....	16
6. Oppbevaring.....	16
7. Vedlikehold	17
8. Feilsøking.....	18
9. Teknisk beskrivelse	19
10. Reservedeler	23
11. Tilleggsutstyr og tilbehør.....	26
12. Garanti	26
13. Annen informasjon.....	27

ADVARSLER OG SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

Les alle instruksjonene før produktet tas i bruk eller repareres

ADVARSEL! For å minimere risikoen for brann, personskader og skader på utstyr/eiendom må følgende instruksjoner overholdes:


1. Produktet må kun installeres og brukes i henhold til instruksjonene i denne bruksanvisningen og annen dokumentasjon fra Care of Sweden. Produktet skal ikke kombineres, monteres eller repareres med deler (for eksempel kontrollenhet og madrass), tilbehør eller reservedeler som ikke er beskrevet i denne håndboken eller annen dokumentasjon fra Care of Sweden. Produktet skal ikke modifiseres.
2. Produktet må plasseres og brukes slik at det ikke kommer i klem eller blir skadet. NB! Vær spesielt oppmerksom på risikoen for klemskader ved bruk av sengehester. Påse alltid at madrassen har riktig størrelse for sengen.
3. Kontroller jevnlig produktets funksjonalitet ved hjelp av en hand check (se punkt 3.3).
4. Når produktet brukes til personer som trenger spesielt tilsyn, for eksempel barn, er det nødvendig med kontinuerlig overvåking.
5. Madrassen beskyttes av et hygienetrekk. Hvis det brukes flere hygienetrekk samtidig, kan det påvirke madrassens dampgjennomtrengelige egenskaper.
6. Hygienetrekket slipper ikke gjennom væske eller luft, men er dampgjennomtrengelig. For å unngå kvelningsrisiko må du påse at brukeren er plassert på riktig måte.
7. Unngå at hygienetrekket skades av skarpe gjenstander.
8. Kontrollenheten må ikke åpnes. Det medfører fare for elektrisk støt. Service og vedlikehold skal utføres av Care of Sweden eller en av deres autoriserte serviceteknikere.
9. Legg strømkabelen til kontrollenheten slik at ingen kan snuble i den. Påse også at brukeren ligger riktig på madrassen, i henhold til instruksjonene, og bruk kabelholder hvis det er mulig.
10. For å unngå kvelningsfare må du påse at kablene og slangene legges på riktig måte, slik at ingen kan snurre seg inn i dem.

NB! Helsepersonellet som har ansvaret, må informere brukeren/operatøren om følgende:

11. Produktet skal ikke brukes på badetrom eller andre steder hvor kontrollenheten kan komme i kontakt med vann eller andre væsker. Du må aldri ta på produktet hvis det har kommet i kontakt med vann/væske. Unntaket er ved rengjøring i henhold til instruksjonene. Trekk umiddelbart støpselet ut av stikkontakten, og send produktet til en godkjent servicetekniker.
12. Må ikke brukes i nærheten av brannkilder / varme overflater, for eksempel åpen ild, tente sigaretter, varmelamper, vifteovner eller varmeovner/peiser, da det kan skade produktet.
13. Produktet må ikke oppbevares eller brukes i direkte sollys. Produktet kan skades av høy temperatur og UV-lys.
14. Sterke magnetfelt eller utstyr for trådløs kommunikasjon (trådløse hjemmenettverk, mobiltelefoner, walkie-talkier, trådløse telefoner og basestasjoner, radiosendere og lignende) kan påvirke produktets funksjonalitet og bør ha minst en meters avstand fra kontrollenheten.
15. Produktet skal aldri brukes hvis strømledningen, kontakten på kontrollenheten eller strømforsyningen er skadet, hvis kontrollenheten er skadet eller hvis den ikke fungerer som den skal. Kontakt en godkjent servicetekniker for undersøkelse og reparasjon.
16. Det må aldri kobles andre ting til kontrollenhetens strømtilkobling enn strømforsyningen fra Care of Sweden.
17. Ikke bruk den eksterne kommunikasjonsslingingen (3,5 mm plugg). Denne inngangen skal bare brukes av produsenten.
18. Hvis hygienetrekket er utstyrt med sidehåndtak, skal disse brukes til å håndtere eller flytte madrassen. Håndtakene skal ikke brukes til å løfte madrassen mens brukeren ligger på den. All annen bruk skjer på egen risiko og omfattes ikke av produktgarantien.
19. For å forhindre at strømforsyningen trekkes ut må du være forsiktig når det er barn og dyr i nærheten.
20. Unngå å bruke dette produktet i nærheten av, eller over annet utstyr. Det kan føre til at det ikke fungerer som det skal. Hvis slik bruk er uunngåelig, må man følge med på både dette produktet og de andre produktene for å sikre at de fungerer som de skal.

1. Innledning

CuroCell® A4 er et helautomatisk og moderne luftmadrass-system som er utformet for å sikre god komfort, samtidig som det bidrar til å forebygge og behandle trykksår/trykkskader. Systemet identifiserer brukeren og justerer automatisk alle innstillingene for å optimalisere trykket basert på brukerens behov.

 Les alltid bruksanvisningen (instruksjoner for bruk) før bruk.

Kontakt Care of Sweden hvis du har spørsmål om installering, bruk eller vedlikehold.

1.1 Generell informasjon

Dette systemet er medisinsk utstyr med CE-merking i samsvar med MDD 93/42/EØF.

Systemet har blitt helt eller delvis designet og kontrollert i samsvar med standardene i kapittel 9.2. Standarder.

I henhold til lovbestemte forskrifter gitt av myndighetene når det gjelder medisinsk utstyr, skal produsenten rapportere alle ulykker eller hendelser som involverer deres produkter. Vi setter stor pris på om all informasjon om ulykker eller hendelser som angår våre produkter, umiddelbart rapporteres til oss i Care of Sweden.

1.2 Tiltent bruk

CuroCell® A4 er tilgjengelig i fem modeller: som overmadrass (CuroCell® A4 OP10 og CuroCell® A4 CX10) og som erstatningsmadrass (CuroCell® A4 CX15, CuroCell® A4 CX16 og CuroCell® A4 CX20). Madrassen kan brukes i alle omsorgsmiljøer for å forebygge trykksår/trykkskader, samt til behandling av trykksår/trykkskader til og med kategori 4 og ikke-klassifiserte trykksår (ikke graderbare og ved mistanke om dyp vevsskade)¹. Uhindrede/ubehandlede trykksår/trykkskader kan raskt forverres, noe som fører til høyere risiko for komplikasjoner, smerter og lidelser for pasienten.

Madrassene skal brukes av personer som er minimum 120 cm lange. Anbefalt brukervekt avhenger av hvilken madrass som brukes. Du finner spesifikasjonene i tabellen nedenfor.

Madras	Anbefalt brukervekt
CuroCell® A4 OP10	0–160 kg
CuroCell® A4 CX10	0–200 kg
CuroCell® A4 CX15	0–200 kg
CuroCell® A4 CX16	0–200 kg
CuroCell® A4 CX20	0–250 kg

Vi anbefaler regelmessige posisjonsendringer. Tidsintervallet må evalueres av ansvarlig helsepersonell, avhengig av brukerens status, allmenntilstand og diagnostiske tilstand.

Madrassen skal kun brukes til å ligge i lengderetningen på madrassen med føttene i den enden som er merket med fotsymbolet.



Det kreves ikke opplæring eller spesialkunnskap for å kunne bruke CuroCell® A4. Den er utformet for å være enkel å håndtere og forstå, men det anbefales å lese hurtigveiledningen og bruksanvisningen før bruk.

Forskrivning skal gjøres av personer som er autorisert for det og som har klinisk utdanning. Legg merke til at brukeren også kan være operatøren.

• Merk:

- 1. For enkelte brukere, for eksempel amputerte, kan det hende at anbefalt lengdemål ikke kan oppnås. Det kan også hende at brukere i denne gruppen krever andre innstillinger siden ikke hele overflaten belastes. Se kapittel 3.2 for funksjonskontroller.
- 2. Ved bruk sammen med posisjoneringsputer må man lese bruksanvisningen for puten nøye for å sikre at brukeren plasseres korrekt.
- 3. Når dette produktet brukes sammen med evakueringsutstyr (evakueringslaken), har det autoriserte personellet ansvaret for å sikre at evakueringen kan utføres på en trygg måte.
- 4. Denne madrassen kan være uegnet for bruk under røntgenundersøkelser på grunn av risikoen for uskarpe bilder eller artefakter som kan resultere i feildiagnostisering.
- 5. Ved strømbrydd eller lignende vil madrassen holde på luften i minst 12 timer.

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel og Pan Pacific Pressure Injury Alliance. *Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide*. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

1.3 Annen informasjon

Handlingsplan for trykksår/trykkskader

For best mulig resultat når produktet brukes, anbefaler vi en strukturert og planlagt tilnærming. Du finner eksempler på hvordan våre produkter kan brukes i retningslinjene «Handlingsplan for trykksår».

Madrasveiledningen

Denne veiledningen inneholder informasjon til personell og forskrivere når det velges en madrass fra Care of Sweden. CuroCell® A4 OP10, CuroCell® A4 CX10, CuroCell® A4 CX15, CuroCell® A4 CX16 og CuroCell® A4 CX20 er madrasser fra funksjonsgruppe C.

Du finner informasjonen på vår hjemmeside, www.careofsweden.com. Den kan også bestilles fra kundeservice (se kontaktinformasjonen bakerst).


2. Montering/Installering

Ved utpakking må du kontrollere at ingen av delene er skadd. Hvis det avdekkes skader, må du kontakte Care of Sweden før produktet tas i bruk.

Ved bruk av overmadrass

(CuroCell® A4 OP10 eller CuroCell® A4 CX10):


1a. Plasser overmadrassen på hovedmadrassen. Fest overmadrassen ved hjelp av stroppene i hjørnene.

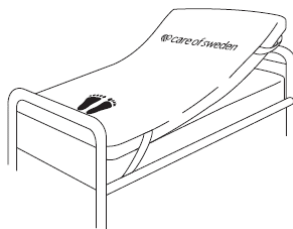

Ved bruk av

erstatningsmadrass (CuroCell® A4 CX15, CuroCell® A4 CX16 eller CuroCell® A4 CX20):


1b. Legg madrassen på sengebunnen. Fest madrassen til sengen ved hjelp av festestroppene på undersiden av madrassen.

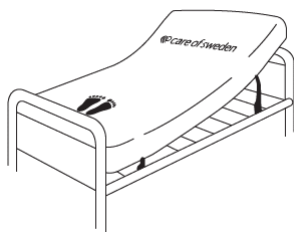

NB!

- Kontroller at madrassen har riktig størrelse for sengen.
- Re opp sengen med laken for økt komfort.
- Hvis erstatningsmadrassen (CuroCell® A4 CX15, CuroCell® A4 CX16 eller CuroCell® A4 CX20) brukes i en justerbar seng med festestropper, skal madrassen bare festes i sengens bevegelige deler.
- Kontroller at cellene og knappene er riktig montert.

2. Heng kontrollenheten på sengegavlen, eller sett den på et flatt, stabilt underlag.

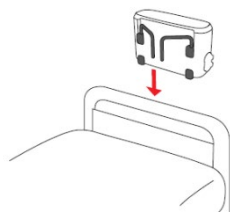

Ved bruk av overmadrass


(CuroCell® A4 OP10 eller CuroCell® A4 CX10):

3a. Hvis madrassen er utstyrt med kabelholder, skal strømledningen legges i kabelholderen. Åpne trykknappene, plasser kablet i åpningen, og lukk trykknappene igjen. Ellers må strømledningen plasseres slik at ingen kan snuble i den, kjøre over den med sengehjul og slik at den ikke kommer i klem når du hever eller senker sengen.


Ved bruk av erstatningsmadrass (CuroCell® A4 CX15, CuroCell® A4 CX16 eller CuroCell® A4 CX20):

3b. Plasser strømledningen i madrassens kabelholder ved å åpne trykknappene, plassere ledningen i åpningen og lukke trykknappene igjen.


4. Åpne lokket på luftslangekoblingen (merket «CPR»), og koble den til siden av kontrollenheten.

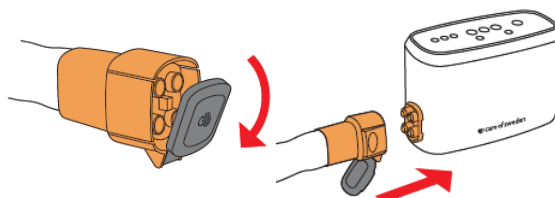

5. Du hører et klikk, og du kjenner når den er koblet til på riktig måte. Påse at begge sider av koblingen er lukket.

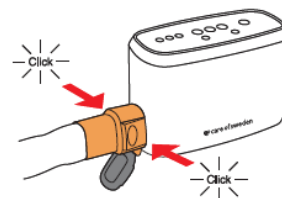

6. Kontroller at bryteren på siden av kontrollenheten er satt til «0» (av). Koble strømforsyningen til egnet stikkontakt (100–240 V).

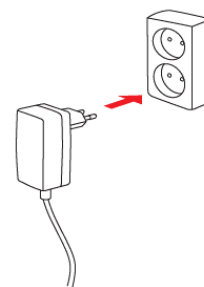

7. Kontroller at strømledningen er koblet til kontrollenheten, og at det brukes riktig strømforsyning. (Se kapittel 9.1 Tekniske spesifikasjoner).

Etiketten på strømforsyningen må vise riktig P/N. Strømforsyningen er en del av utstyret og skal ikke byttes ut.


Hvis kontrollenheten har blitt oppbevart ved minimums- eller maksimumstemperatur (–25 til +70 °C), må du vente i minst en time før den slås på. Tiden er basert på romtemperatur på 20 °C.

NB:

- Ikke hold i 12 V pluggen på strømforsyningen mens du tar på brukeren.
- Koble strømforsyningen til en lett tilgjengelig stikkontakt, tilfelle du må koble ut strømforsyningen og bryte strømmen til kontrollenheten.

3. Bruk

3.1 Start

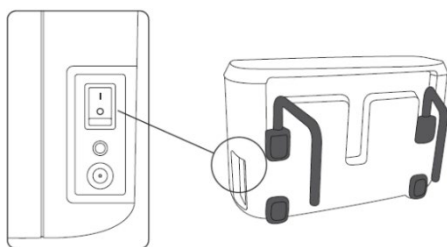












1. Still strømbryteren på siden av kontrollenheten til 1 (på).
2. Det pumpes luft inn i madrassen, og dioden over valgt program blinker. Når fyllprosessen er fullført, lyser programdioden fast grønt. Det tar cirka 20–40 minutter å fylle madrassen helt, avhengig av størrelsen.
3. Når den grønne dioden for det valgte programmet lyser konstant, kan madrassen tas i bruk.
4. Det tar cirka 20–30 minutter før systemet har justert seg etter brukeren.

NB:

- Systemet gjør følgende ved hver oppstart:
 - Når det brukes en madrass uten en luftsikkerhetsmadrass (CuroCell® A4 OP10, CuroCell® A4 CX10 og CuroCell® A4 CX16), vil kontrollenheten blåse hovedcellene helt opp, og deretter gjennomføre en automatisk justering.
 - Når det brukes en madrass med luftsikkerhetsmadrass (CuroCell® A4 CX15 og CuroCell® A4 CX20), vil kontrollenheten alltid starte ved å blåse helt opp sikkerhetsmadrassen, deretter de andre cellene, og så gjennomføres en automatisk justering.
- Når den automatiske justeringen er fullført, går kontrollenheten over til grunninnstilling med pulserende modus (når den brukes for første gang) eller til den innstillingen som ble brukt sist. Se kapittel 3.2 for mer informasjon.
- Mens den automatiske justeringen gjennomføres, bør man unngå store bevegelser på madrassen for å unngå at den automatiske justeringen tar lang tid.
- Når det brukes en madrass med sikkerhetsmadrass av skum (CuroCell® A4 CX16), kan brukeren ligge på madrassen selv om den ikke er blåst opp.
 - Når det brukes en madrass med en luftsikkerhetsmadrass (CuroCell® A4 CX15 og CuroCell® A4 CX20), må denne blåses opp før brukeren kan ligge på den.
 - I begge tilfeller vil sikkerhetsmadrassen bære belastningen.

3.2 Kontrollenhetens funksjoner



Knapp	Funksjon
	Demp informasjonssignalet
	Panellås
	Pack & Go. Automatisk tømning av systemet
	Vekselmodus
	Pulserende modus
	CPR-modus (konstant lavt trykk)
	Maksimalt trykk (pleiemodus)
	Informasjonssignal
	Lufttilkoblingen er koblet til på feil måte (CPR)
	Innstillinger for syklustid (10, 15, 20 eller 25 minutter). Diodene brukes også til feilmeldinger.
	Komfortinnstillinger

3.2.1 Automatisk justering

Kontrollenheten har en funksjon som automatisk justerer trykket basert på brukerens vekt, stilling og posisjon. Denne funksjonen fungerer på følgende tre måter:

1. Kontrollenheten gjennomfører en automatisk justering umiddelbart etter at systemet slås på.
2. Hvis det oppstår større endringer under bruk, vil kontrollenheten gjennomføre en automatisk justering.
3. Under bruk vil kontrollenheten gjennomføre automatiske justeringer med jevne mellomrom for å sikre at det alltid er riktig trykk i madrassen.

Når den automatiske justeringen er fullført, vil kontrollenheten enten starte i standard pulserende modus (når den brukes for første gang) eller i den modusen som ble brukt sist.

3.2.2 Programmer

Det finnes tre programmer. Trykk på knappen for å veksle mellom programmene. Vi anbefaler pulserende modus som grunnleggende innstilling, og dette er også standardinnstillingen fra start.



1. Vekslende modus. Trykket veksler mellom cellene. Syklusperioden kan endres i henhold til brukerens behov og krav. Velg mellom 10, 15, 20 eller 25 minutter. Jo lengre

syklusperiode, desto saktere vekslinger. Vi anbefaler en grunninnstilling på 10 minutter.



2. Pulserende modus. En komfortmodus som kombinerer statisk lavt trykk (CPR) med vekselmodus. Syklusperioden kan endres i henhold til brukerens behov og krav. Jo lengre

syklusperiode, desto saktere vekslinger. Vi anbefaler en grunninnstilling på 10 minutter.



3. CPR-modus. Det er likt trykk i alle celler. Dette kalles også «konstant lavt trykk».

3.2.3 Maksimalt trykk (pleiemodus)



Med denne funksjonen fylles hele madrassen for å gi fast støtte. Denne funksjonen går automatisk tilbake til den forrige innstillingen etter cirka 20 minutter.

Denne funksjonen bør brukes når pasienten gis pleie, flyttes i sengen eller skal ut eller inn i sengen.

3.2.4 Panellås


Trykk på knappen for låsing for å låse eller låse opp kontrollpanelet. Knappen indikerer om panelet er låst. Skjermen låses automatisk hvis den ikke brukes i løpet av fem minutter. Dette for å forhindre at innstillingene endres ved et uhell.

For å låse opp holdes



knappen inne i to sekunder.

3.2.5 Komfortinnstillinger

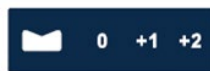


Lufttrykket i madrassen kan justeres til tre nivåer, basert på brukerens behov. Justeringen gjøres basert på

den automatiske justeringen som kontrollenheten utfører (0), basert på brukerens vekt.

NB! Når kun deler av madrassen belastes, for eksempel ved amputerte, kan det være behov for å øke innstillingen ved hjelp av komfortinnstillingene.

Valgt innstilling vises med et grønt lys.

3.3 Hand check (funksjonskontroll)

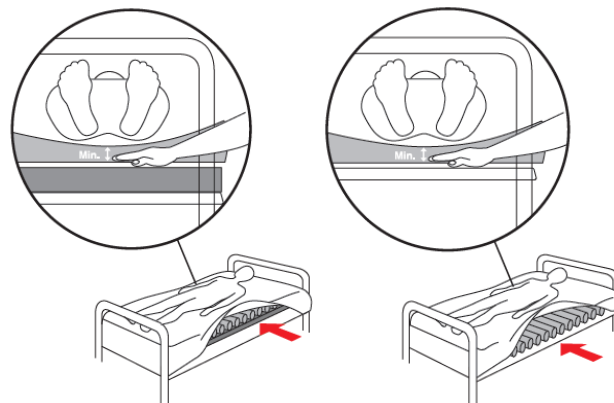

Hand check når det brukes over- madrass

Hand check når det brukes erstatnings- madrass

Hand check utføres for å kontrollere at madrassen fungerer som den skal.

Den må utføres regelmessig, vi anbefaler en gang per vakt eller hver åttende time.


Åpne trekket, og stikk hånden inn mellom de øvre cellene under brukerens korsbein (midt på madrassen). Kontroller at det er mellomrom til den underliggende madrassen slik at brukeren ikke «bunner». Hvis du føler at brukerens korsbein hviler mot hånden din, er åpningen for liten. Gjennomfør en ny automatisk justering, eller se kapittel 8 Feilsøking.

3.4 Sittestilling i sengen

Når sengens hodeende heves til sittestilling, må brukerens posisjon alltid sikres. Vi anbefaler at det alltid utføres en håndsjekk (se avsnitt 3.3) for å sikre at produktet fungerer som det skal. For ekstra støtte kan det brukes posisjoneringsputer. Vi anbefaler at sittende stilling bare brukes i korte perioder

3.5 CPR (hjerter-lunge-redning)


Hvis det oppstår en nødsituasjon hvor det er behov for HLR (hjerter-lunge-redning), må kontrollenheten kobles fra. La lokket være åpent, slik at madrassen raskt tømmes for luft.

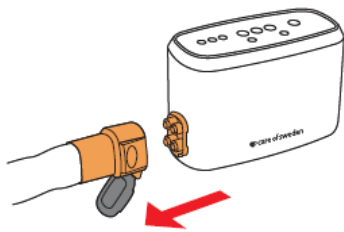

3.6 Varsler



Det finnes forskjellige varsler basert på alvorlighetsgrad. Funksjonsfeil og andre feil varsles med en blinkende trekant. Trykk på dempeknappen for å dempe signalet.

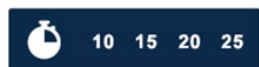

Når det oppstår et varsel, vil aktuell diode for syklustid slukke, og de fire diodene for syklustid (10, 15, 20, 25) viser en feilkode. Lås opp kontrollpanelet for å lese av syklustiden under feilmeldingen. Du finner mer informasjon om de forskjellige kodene i kapittel 3.5.1.

3.6.1 Oversikt over varsler

Du finner informasjon om hvert varsel i tabellen:

- Varsler fra 1 til 10 er både hørbare og visuelle. Feilkoden vises til feilen er utbedret. Hvis du trykker på dempeknappen, slås det hørbare varselet av i fem minutter. Deretter aktiveres det igjen, hvis feilen ikke er utbedret.
- Varslene 11 til 13 har ingen hørbar alarm. Feilkoden vises til systemet startes på nytt.

	Varsel	Beskrivelse og feilsøking
1		Høy temperatur. Ventilene og kompressorer slås av. Hvis kontrollenheten står i direkte sollys, må den flyttes. Hvis ikke, må du kontakte brukerstøtte.
2		Standardinnstillingene er ikke fullført. Kontakt brukerstøtte.
3		Feil inngangsspenning. Påse at det brukes riktig strømforsyning. Hvis det gjør det, må du kontakte brukerstøtte.

4		Lavt trykk. Fest CPR, madrass, luftslanger og luftfilter. Kontakt brukerstøtte hvis problemet vedvarer.
5		Feil under automatisk justering. Riktig trykk ble ikke oppnådd innen tidsfristen. Kontakt brukerstøtte hvis problemet vedvarer.
6		Lekkasje under automatisk justering. Madrassen lekker for mye til at veiingen kan gjennomføres. Kontroller madrassen og lufttilkoblingene. Kontakt brukerstøtte hvis problemet vedvarer.
7		Høyt trykk. Trykket kan ikke reduseres til ønsket verdi innenfor tidsfristen. Kontakt brukerstøtte.
8		Den automatiske justeringen har blitt startet på nytt for mange ganger under den automatiske justeringen. Kontakt brukerstøtte.
9		Madrassens kontrollparametre er ikke lest. Koble til CPR, eller kontakt brukerstøtte.
10		Madrassens kontrollparametre har blitt endret under bruk. Start systemet på nytt. Kontakt brukerstøtte hvis problemet vedvarer.
11		Lekkasje i en av celledelene. Sikre CPR, madrassen og tilkoblingsslangene. Kontakt brukerstøtte hvis problemet vedvarer.
12		Lekkasje i en av celledelene. Sikre CPR, madrassen og tilkoblingsslangene. Kontakt brukerstøtte hvis problemet vedvarer.
13		Lekkasje i en av celledelene. Sikre CPR, madrassen og tilkoblingsslangene. Kontakt brukerstøtte hvis problemet vedvarer.

3.6.2 Varsling ved maksimalt trykk



Når funksjonen «Maksimalt trykk» har blitt brukt over lengre tid, vil lysdioden for maksimalt trykk blinke. Hvis bruken er tilsiktet, kan varselet ignoreres.

3.7 Transportfunksjon

Hvis brukeren må flyttes i sengen, kan det gjøres på to måter:

- Koble fra CPR-tilkoblingen, lukk lokket, plasser HLR-tilkoblingen ved enden av sengen og fjern kontrollenheten fra sengen. Madrassen holder på luften i minst 12 timer.

eller

- Trekk ut strømforsyningen fra stikkkontakten, og la kontrollenheten henge fra sengen under transporten. Madrassen holder på luften i minst 12 timer.

Vi anbefaler at denne funksjonen kun brukes i korte perioder av gangen.

3.8 Pack&Go®-funksjon (tømming)

Etter bruk kan produktet enkelt pakkes ned på følgende måte:


- Påse at det ikke ligger noen på madrassen.
- Trykk på låseknappen på kontrollpanelet.
- Hold inne knappen Pack&Go® i to sekunder.



Pack&Go®-dioden blinker under tømming. Madrassen tømmes for luft og kan brettes sammen etter 20 minutter. Kontrollenheten gir et lydsignal når tømmingen er fullført.

Brett madrassen forsiktig sammen, plasser kontrollenheten mellom brettene, og plasser systemet i en transportveske (ekstrautstyr) eller tilsvarende for å beskytte det under oppbevaring. Påse at strømforsyningen pakkes i sin helhet.

3.9 Omstart

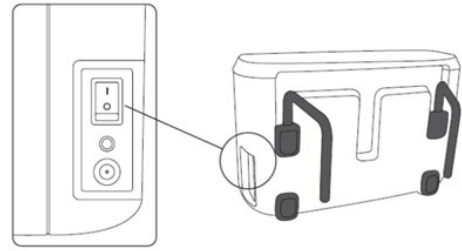


Hvis det er behov for omstart, stiller du strømbryteren på siden av kontrollenheten til 0 (av). Vent i ca. 10 sekunder, og start deretter kontrollenheten på nytt. Nå starter kontrollenheten. Se kapittel 3.1.

4. Produktbeskrivelse

4.1 Kontrollenhet

1. Kontrollpanel
2. Slange-/CPR-tilkobling
3. Strømbryter, på/av
4. 3,5 mm inngang (skal bare brukes av produsenten)
5. Tilkobling av strømkabel
6. Luftfilter
7. Hengere
8. Strømtilførsel

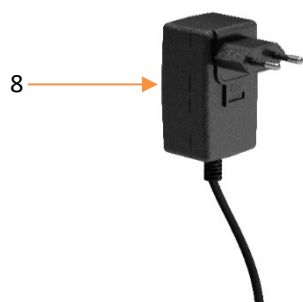

4.2 Madrasser

Hælfunksjon

Madrassene CuroCell® A4 har innebygd hælfunksjon som er utformet for å redusere trykket mot sensitive hæler (bortsett fra CuroCell® A4 CX10).

Trekk

Madrassene CuroCell® A4 leveres med et hygienetrekk. Det er enkelt å håndtere og vedlikeholde, og det overholder de strenge kravene til rengjøring og hygiene. Hygienetrekket er dampgjennomtrengelig, noe som betyr at damp transporteres bort slik at risikoen for hudbløtting reduseres. Følgende trekk er tilgjengelig for madrassene CuroCell® A4:

Trekk Olivia – et avtakbart trekk med dryppssikker glidelås. Farge: lys grå. Brukes til CuroCell® A4 OP10 og CuroCell® A4 CX10.


Trekk Stone – et avtakbart trekk med dryppssikker glidelås og sveisede sømmer. Farge: mørk grå. Brukes til CuroCell® A4 OP10 og CuroCell® A4 CX10.

Trekk Olivia/CC – et avtakbart trekk med dryppssikker glidelås. Kan deles (topp og bunn). Funksjonelle håndtak for å flytte madrassen. Farge: lys grå / svart. Brukes til CuroCell® A4 CX15, CuroCell® A4 CX16 og CuroCell® A4 CX20.

Trekk Stone/CC – et avtakbart trekk med dryppssikker glidelås og sveisede sømmer. Kan deles (topp og bunn). Funksjonelle håndtak for å flytte madrassen. Farge: mørk grå / svart. Brukes til CuroCell® A4 CX15, CuroCell® A4 CX16 og CuroCell® A4 CX20.

CuroCell® A4 OP10

1. Madrass
2. Slangetilkobling og CPR (rask tømning)
3. Kontrollenhet

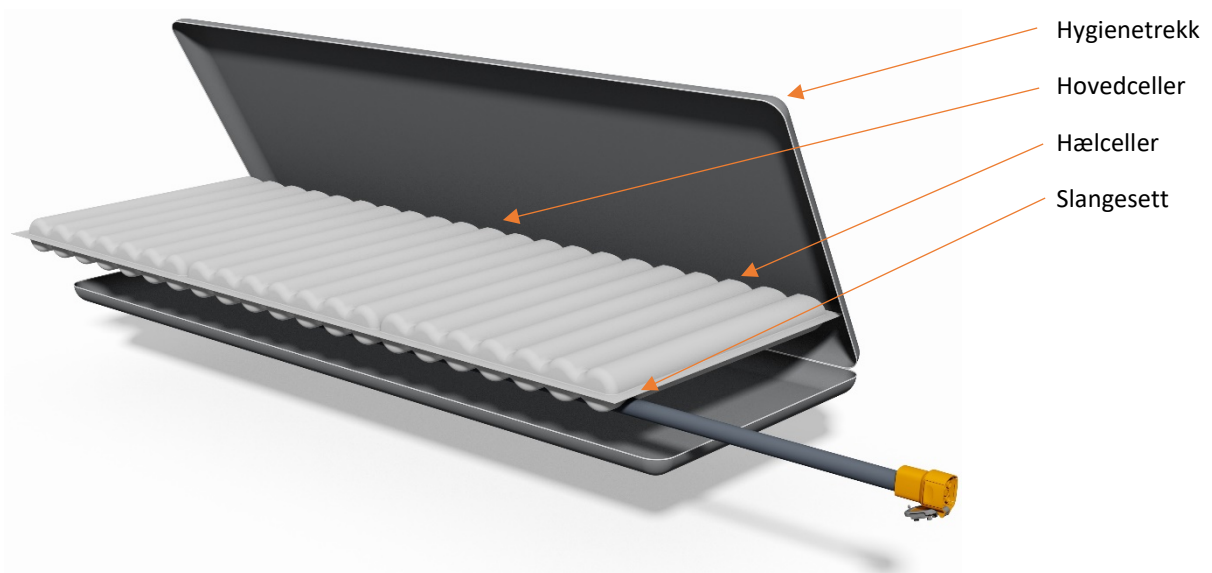


CuroCell® A4 CX10

1. Madrass
2. Slangtilkobling og CPR (rask tømning)
3. Kontrollenhet




CuroCell® A4 CX10 med trekk Stone

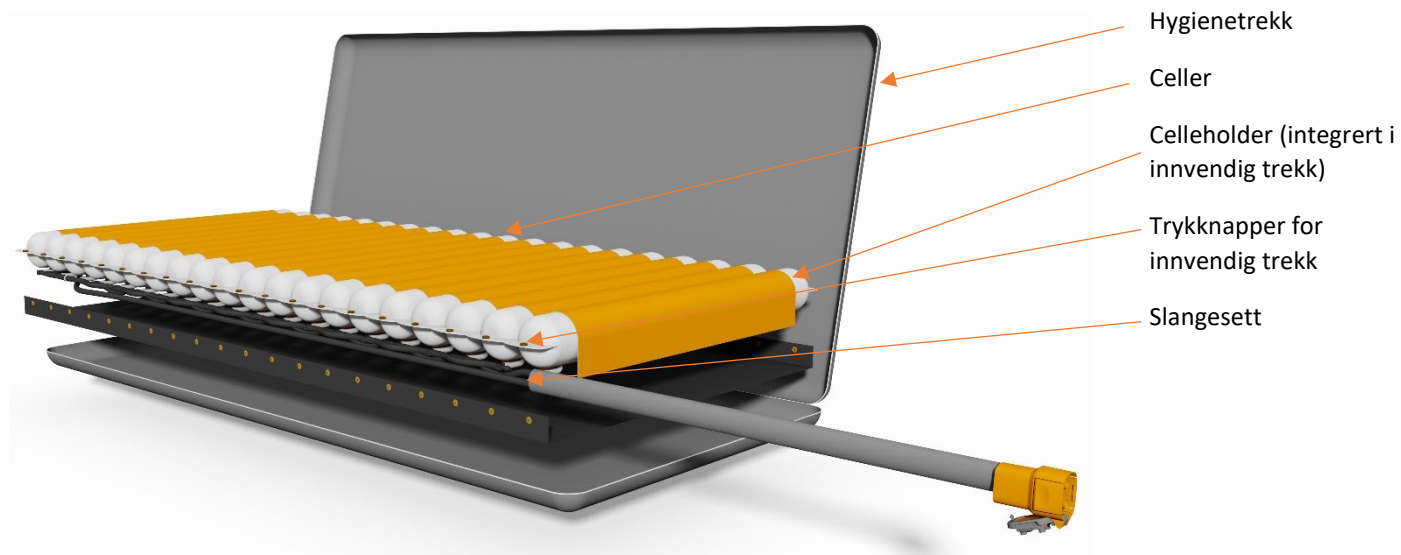

CuroCell® A4 CX15

1. Madrass
2. Slangetilkobling og CPR (rask tømning)
3. Kontrollenhet

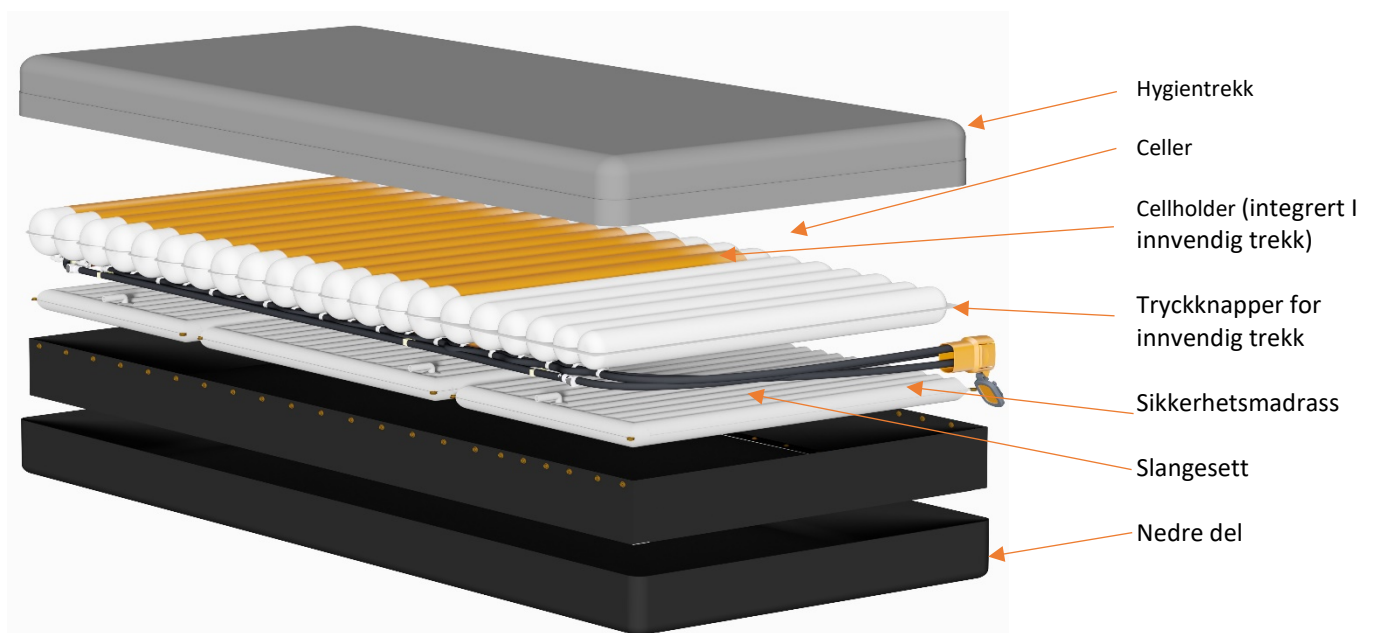


CuroCell® A4 CX16

1. Madrass
2. Slangetilkobling og CPR (rask tømning)
3. Kontrollenhet



CuroCell® A4 CX16 med trekk Stone/CC

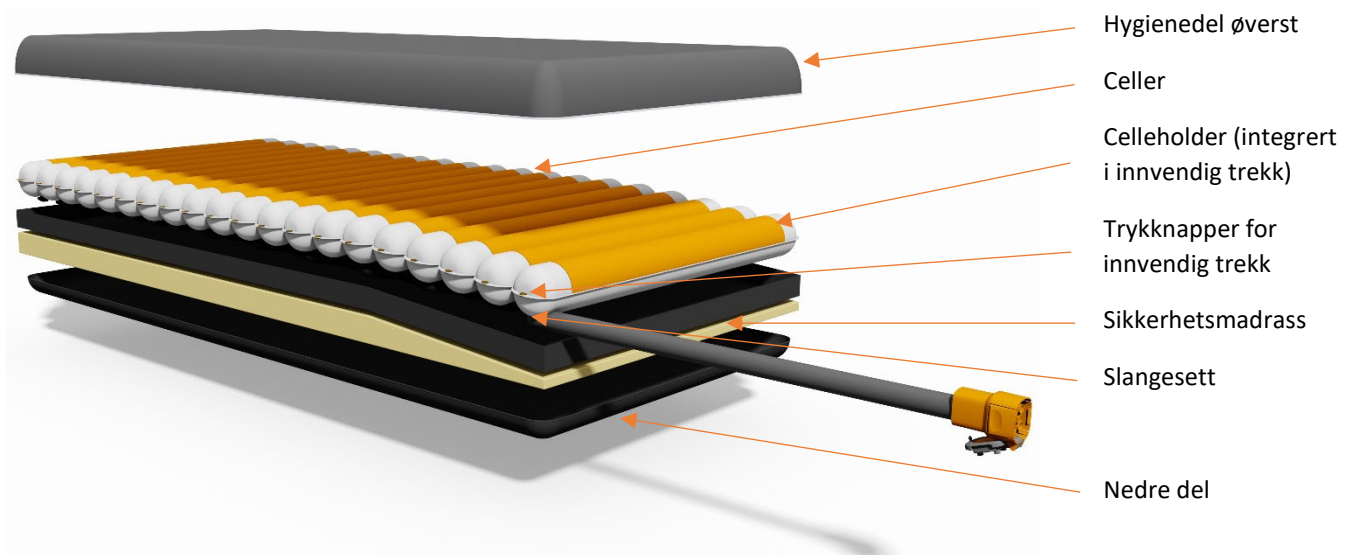


CuroCell® A4 CX20

1. Madrass
2. Slangetilkobling og CPR (rask tømming)
3. Kontrollenhet



CuroCell® A4 CX20 med trekk Stone/CC

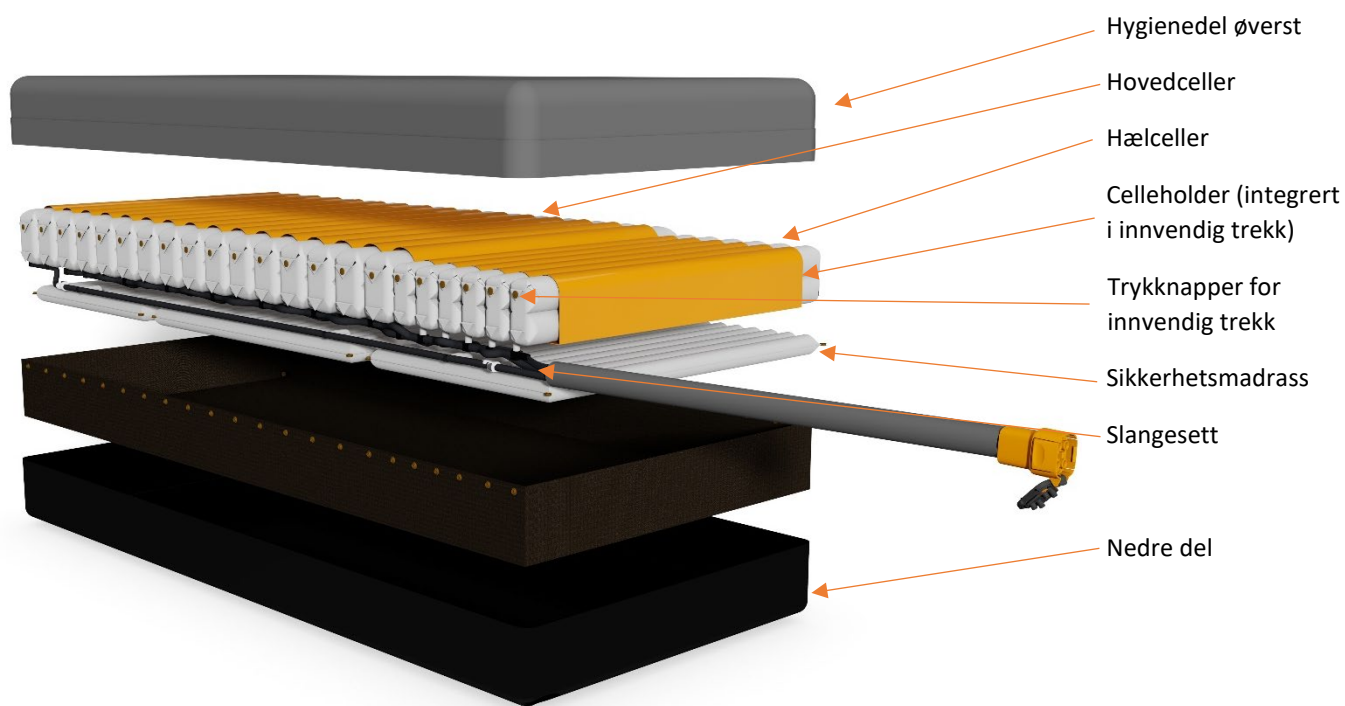

5. Rengjøring og rekondisjonering

Det er viktig å følge instruksjonene for rengjøring og rekondisjonering. Før produktet brukes av en ny bruker, anbefales det å rengjøre madrassen i samsvar med instruksjonene nedenfor. Kontakt din hygieneansvarlig eller Care of Sweden for hjelp og instruksjoner hvis du er usikker.

Rengjøring og rekondisjonering må gjennomføres ved behov.

5.1 Rengjøring

KONTROLLENHET



Tørk av kontrollenheten med en fuktig klut og en mild rengjøringsløsning til dette formålet, for eksempel alkohol med eller uten tensider, oksiderende løsninger eller klor maks. 1 %, eller hydrogenperoksid maks. 1,5 %.

Hvis det brukes et annet middel, må du velge et som ikke påvirker kontrollenheten.

MADRASSTREKK



Du kan tørke av trekk med en mild rengjøringsløsning til dette formålet, for eksempel alkohol med eller uten tensider, isopropanol 70 %, oksiderende løsninger, klor maks. 1 % (maks. 10 % for trekk Stone) eller hydrogenperoksid maks. 1,5 %.

Ekskrementer og blodflekker må fjernes så raskt som mulig. Bruk kaldt vann. Følg lokale anvisninger og rengjøringsmidlenes bruksanvisninger.



Trekk som består av flere lag, skal separeres før vask. Delene må vaskes sammen med liknende farger.



Klor og fenolbaserte rengjøringsmidler kan påvirke PU-overflaten negativt og bør unngås. Hvis det brukes klor, anbefaler vi en blanding på maks. 1 % (maks. 10 % for trekk Stone).

INNSENDIG TREKK



Rengjør området med en mild rengjøringsløsning til dette formålet, for eksempel alkohol med eller uten tensider, isopropanol 70 %, oksiderende løsninger, klor maks. 1 % eller hydrogenperoksid maks. 1,5 %.

5.2 Rekondisjonering

KONTROLLENHET

Se instruksjoner i kapittel 5.1.

MADRASS

1. Koble slangetilkoblingen fra kontrollenheten, og tøm madrassen for luft.
2. Fjern trekkene. Du finner mer informasjon om rengjøring av trekkene i kapittel 5.1.
3. Flytt madrassen til et rent og egnet vaskeområde.
4. Tørk av cellene, alle slangene og CPR-ventilen med en mild rengjøringsløsning til dette formålet, for eksempel alkohol med eller uten tensider, isopropanol 70 %, oksiderende løsninger, klor maks. 1 % eller hydrogenperoksid maks. 1,5 %. La det tørke.
5. Tørk av arbeidsflatene med egnet rengjøringsmiddel eller desinfiseringsmiddel.
6. Sett sammen madrassen. Hvis det har løsnet celler fra slangene, må disse byttes i som vist i tegningen i kapittel 4.2.

SKUMKJERNE

Rengjør det berørte området med et mildt rengjøringsmiddel (for eksempel oppvaskmiddel) og vann eller med et spritbasert desinfeksjonsmiddel som er beregnet til dette formålet. Press vannet forsiktig ut. NB! Ikke vri opp eller rull sammen skumkjernen for å få ut vannet. La den tørke på et varmt sted med god ventilasjon (unngå direkte sollys). Skumkjernen må være helt tørr før den brukes på nytt.

NB:

- Kontroller hygienetrekket hver gang produktet rengjøres.
- Hvis det er skadet, må det skiftes eller repareres. Kontroller også kontrollenheten, slangekoblingene og strømledningen ved rengjøring. Skadde deler må skiftes ut eller repareres.

6. Oppbevaring

Det anbefales å oppbevare madrassen og kontrollenheten i produktvesken (ekstrautstyr), den originale emballasjen eller tilsvarende. Det pakkede produktet må håndteres forsiktig. Ikke legg tunge gjenstander på det.

7. Vedlikehold

7.1 Generelt

Luftmadrasen CuroCell® A4 er et medisinteknisk produkt i samsvar med MDD 93/42/EØF, og den brukes som hjelpemiddel i forebygging og behandling av trykksår/trykkskader. Derfor anbefaler vi at kontrollenheten regelmessig gjennomgår service og kontroll for å opprettholde funksjonalitet og yteevne. En godt vedlikeholdt kontrollenhet arbeider bedre og holder lenger, i likhet med annet teknisk utstyr.

Service og vedlikehold skal alltid utføres av Care of Sweden eller en av de autoriserte teknikerne. Bruk kun reservedeler som er godkjent av Care of Sweden. Bruk av reservedeler som ikke er godkjent, opphever garantien. Se servicehåndboken for CuroCell® A4 for mer informasjon.

Feil og defekter som regnes som garantifeil, repareres kostnadsfritt.

Eventuelle garantikrav skal meldes til Care of Sweden før produktet returneres.

Når produktet har blitt brukt, må du kontrollere at:

1. Strømkabelen og strømforsyningen er hele og ikke har blitt skadet.
2. Tilkoblingslangene (merket CPR) på siden av kontrollenheten er riktig plassert og ikke lekker.
3. Hygienetrekket er helt, og at trekket og cellene er satt riktig sammen.
4. Ingen slanger eller koblinger er skadde eller ligger i klem. Kontakt Care of Sweden hvis du trenger reservedeler.

7.2 Bytte luftfilter

Før vedlikehold utføres, må du påse at kontrollenheten er slått av. Service skal ikke gjennomføres mens produktet er i bruk.

Slik bytter du luftfilteret:

1. Fjern den lille beskyttelsesplaten på baksiden av kontrollenheten ved hjelp av en T10 Torx-skrutrekker.



2. Fjern filteret fra holderen.
3. Plasser det nye filteret i holderen, med den rosa siden vendt ut. Monter beskyttelsesplaten igjen ved hjelp av skrueene.

Hvis kontrollenheten brukes et i svært skittent miljø, bør filteret kontrolleres regelmessig.



8. Feilsøking

Problem	Løsning
Kontrollenheten starter ikke	Kontroller at strømforsyningen er koblet til stikkontakten. Kontroller at den grønne LED-dioden på strømforsyningen lyser grønt.
Brukeren «bunner»	Start kontrollenheten på nytt. Se kapittel 3.8. Kontrollenheten starter en automatisk justering. Vent til den automatiske justeringen er fullført. Gjennomfør en ny håndkontroll (se kapittel 3.3). Hvis mellomrommet fortsatt er for lite, kan du øke komfortinnstillingen i trinn. Kontakt Care of Sweden hvis problemet vedvarer.
Madrassen ligger ikke stille	Kontroller at madrassen er festet til sengen med stroppene på undersiden (to i hodeenden og to på hver langside av madrassen).
Noen celler har mindre luft	Dette er normalt hvis det er valgt et vekselprogram (pulserende modus eller vekselmodus). Da vil lufttilførselen veksle mellom celler i en forhåndsbestemt tidssyklus (en syklus = 10–25 minutter).
Kontrollenheten bråker, og det vibrerer merkbart	Undersøk hvordan kontrollenheten er hengt på sengen. Det kan forekomme resonans, det kjennes vibrasjoner i deler av sengen. Fjern kontrollenheten, og se om det hjelper. Kan løses ved å plassere kontrollenheten på et flatt, stødig underlag eller ved å legge et håndkle mellom kontrollenheten og sengen. Kontakt Care of Sweden hvis problemet vedvarer.

Hvis du ikke fant svar på spørsmålene dine i denne informasjonen, kan du kontakte Care of Sweden eller din leverandør.

9. Teknisk beskrivelse

9.1 Tekniske spesifikasjoner

NB! Care of Sweden forbeholder seg retten til å modifisere produktspesifikasjonene uten ytterligere forvarsel.

SPESIFIKASJONER FOR KONTROLLENHET		
Modell		CuroCell® A4
Spenning inn		100–240 V / 50–60 Hz
Strømförbruk		1.5 A
Driftsmodus		Vekslende, pulserende og CPR (konstant lavt trykk)
Arbeidssyklus	(Pulserende og vekslende)	10 min, 15 min, 20 min, 25 min
Strømtilførsel	Ujordet stikkontakt med vekselstrøm, elektrisk sikkerhetsklasse II	Bruk kun strømforsyning med P/N WR9QE1500LRPCIMG3138
Dimensjoner (L x B x H)		11 x 30 x 20 cm
Vekt		2,9 kg
Lydnivå, kontrollenhet, maks.:		17 dBA (ved operatørposisjon), 16,5 dBA (ved hodeenden). Angir den høyeste verdien i samsvar med EN ISO 11201:2010 når kontrollenheten plasseres i fotenden.
Miljø	Temperatur	Drift: 5 til 40°C Oppbevaring: –25 til +70°C Transport: –25 til +70°C
	Fuktighet	Drift: 15 % – 93 % ikke-kondenserende Oppbevaring: < 93 % ikke kondenserende
	Atmosfærisk	700 hPa – 1060 hPa
Elektrisk klassifisering		Klasse II, type BF
IP-klassifisering		IP42
Sikkerhetsgrad i nærheten av brennbare anestesimidler:		Enheden skal ikke brukes i nærheten av brennbare anestesigasser
Anvendt del		Madrass
MADRASSENS SPESIFIKASJONER		
Modell	Dimensjoner (B x L x H)	Vekt
CuroCell® A4 OP10	80/85/90 x 200/210 x 10 cm	3,7 kg (80 x 200 cm)
CuroCell® A4 CX10	80/85/90/100/105/120 x 200/210 x 10 cm	5,2 kg (80 x 200 cm)
CuroCell® A4 CX15	80/85/90/100/105/120 x 200/210 x 15 cm	10,0 kg (80 x 200 cm)
CuroCell® A4 CX16	80/85/90/100/105/120 x 200/210 x 16 cm	12,0 kg (80 x 200 cm)
CuroCell® A4 CX20	80/85/90/100/105/120 x 200/210 x 20 cm	11,0 kg (80 x 200 cm)

9.2 Standarder

Systemet er testet og godkjent i samsvar med følgende europeiske standarder, og gjeldende krav er oppfylt.

IEC 60601-1	EN ISO 10993	ISO 3746
IEC 60601-1-2	EN 12182	ISO 11201
IEC 60601-1-11	EN 597-1	
IEC 60601-1-6	EN 597-2	
IEC 62304	EN ISO 14971	
	EN 14126	

9.3 Merking


KONTROLLENHETEN

Kontrollenheten er merket som vist nedenfor (eksempel). Se kapittel 9.4 Forklaring av symboler for mer informasjon.

CuroCell A4

REF CP102-EN0000 (CC-8843)

Mattress pump CuroCell A4

 Care of Sweden AB
Fabrikgatan 5A
SE-514 33, Tranemo, SWEDEN
www.careofsweden.com

© Care of Sweden AB, DE-0011 v1.00



CE IP42




SN 201801-00003



STRØMFORSYNING

Strømforsyningen er en del av kontrollenheten, og den er merket som vist nedenfor (eksempel).

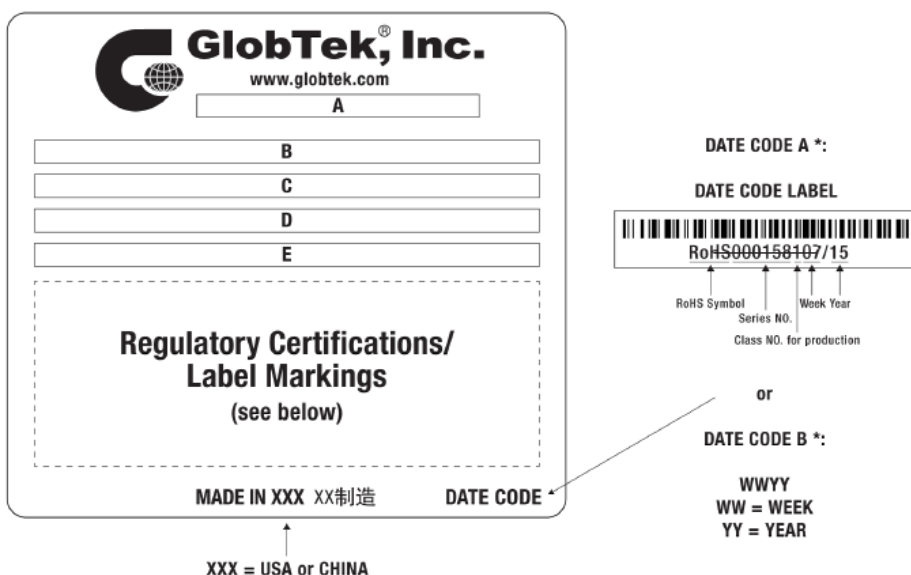


A=ITE / Medical Power Supply/Class 2/Household Power Supply

B=P/N: (料号) WR9QE1500LRPCIMG3138

C=Model (型号) GTM96180-1817.9-5.9


D=Input (输入) 100-240V~, 50-60 Hz, 0.6 A

E=Output (输出) 12 V  1.5 A, 18.0W

Se kapittel 9.4 Forklaring av symboler for mer informasjon.

MADRASSEN

Madrasen, trekket og det innvendige trekket er merket som vist under (eksempel).

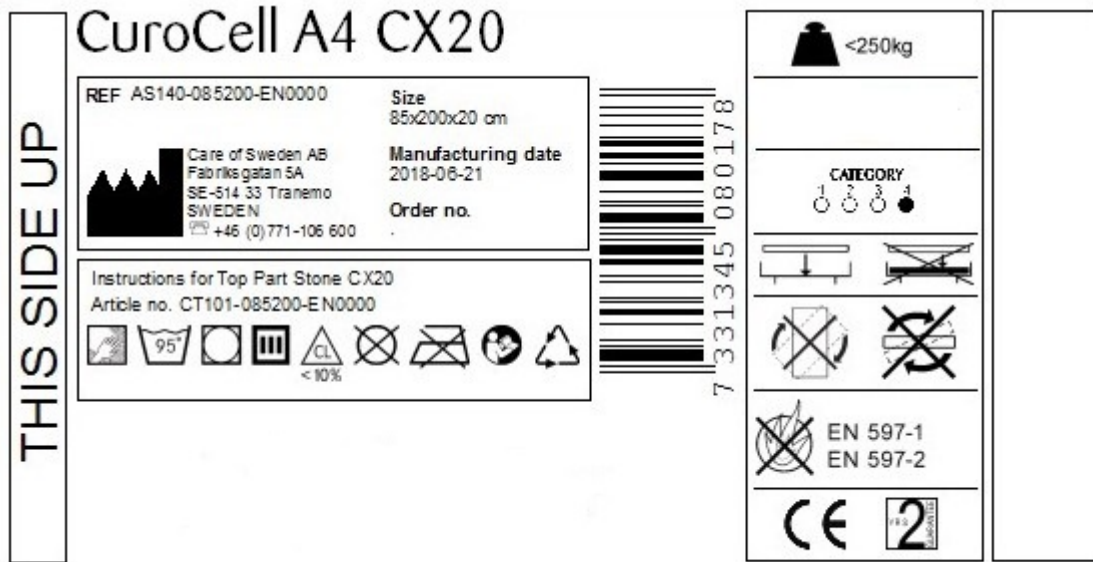

Se kapittel 9.4 Forklaring av symboler for mer informasjon.

9.4 Forklaring av symboler



Artikkelnummer



Produsent

XXXX-XX-XX

År-Måned-Dag



Fotplassering



Les bruksanvisningen



Type BF



CE-merket i samsvar med MDD 93/42/EØF



Resirkulering



Må ikke kastes i restavfallet. Følg reglene for resirkulert.



0-160kg

Anbefalt bruker-vekt



Brukerinformasjon – kategori



Plasseres direkte på sengebunnen



Motvirker vevsforskyvning




Hælfunksjon




Plasseres på eksisterende madrass



Må ikke maskinvaskes

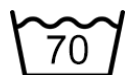

Maskinvaskes ved 70 °C

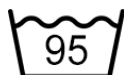

Maskinvaskes ved 95 °C



Klor



Trommeltørking



Ikke trommeltørking



Drypptørkes



Kan ikke strykes



Skal ikke renses



Tørkes ren



Kan ikke roteres




Kan ikke snus



EN 597-1
EN 597-2

Brannkrav

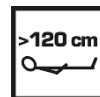

Minimumslengde



Serienummer



Klasse II-utstyr (dobbeltisolert). Viser på strømforsyningen.



IP-klasse (kapslingsklasse)



Madrassen skal brukes mens brukeren ligger i lengderetningen.

10. Reservedeler

CuroCell® A4 OP10

Trekk Olivia OP10

Art.nr.	Størrelse
OC103-080200-XX0000	80 x 200 cm
OC103-080210-XX0000	80 x 210 cm
OC103-085200-XX0000	85 x 200 cm
OC103-085210-XX0000	85 x 210 cm
OC103-090200-XX0000	90 x 200 cm
OC103-090210-XX0000	90 x 210 cm

Trekk Stone OP10

Art.nr.	Størrelse
OC101-080200-XX0000	80 x 200 cm
OC101-080210-XX0000	80 x 210 cm
OC101-085200-XX0000	85 x 200 cm
OC101-085210-XX0000	85 x 210 cm
OC101-090200-XX0000	90 x 200 cm
OC101-090210-XX0000	90 x 210 cm

Madrass

Art.nr.	Beskrivelse	Størrelse
CC-901990	Luftceller	80 x 200 x 10 cm
CC-901991	Luftceller	80 x 210 x 10 cm
CC-901992	Luftceller	85 x 200 x 10 cm
CC-901993	Luftceller	85 x 210 x 10 cm
CC-901994	Luftceller	90 x 200 x 10 cm
CC-901995	Luftceller	90 x 210 x 10 cm

Slangesett

Art.nr.	Beskrivelse	Art.nr.	Beskrivelse
CC-908057-200	Slangesett 200 cm	CC-908057-210	Slangesett 210 cm

CuroCell® A4 CX10

Trekk Olivia CX10

Art.nr.	Størrelse
CC103-080200-XX0000	80 x 200 cm
CC103-080210-XX0000	80 x 210 cm
CC103-085200-XX0000	85 x 200 cm
CC103-085210-XX0000	85 x 210 cm
CC103-090200-XX0000	90 x 200 cm
CC103-090210-XX0000	90 x 210 cm
CC103-100200-XX0000	100 x 200 cm
CC103-100210-XX0000	100 x 210 cm
CC103-105200-XX0000	105 x 200 cm
CC103-105210-XX0000	105 x 210 cm
CC103-120200-XX0000	120 x 200 cm
CC103-120210-XX0000	120 x 210 cm

Trekk Stone CX10

Art.nr.	Størrelse
CC101-080200-XX0000	80 x 200 cm
CC101-080210-XX0000	80 x 210 cm
CC101-085200-XX0000	85 x 200 cm
CC101-085210-XX0000	85 x 210 cm
CC101-090200-XX0000	90 x 200 cm
CC101-090210-XX0000	90 x 210 cm
CC101-100200-XX0000	100 x 200 cm
CC101-100210-XX0000	100 x 210 cm
CC101-105200-XX0000	105 x 200 cm
CC101-105210-XX0000	105 x 210 cm
CC101-120200-XX0000	120 x 200 cm
CC101-120210-XX0000	120 x 210 cm

Madrass

Art.nr.	Beskrivelse	Størrelse
CC-901531	Hovedcelle, PU	80 x 10 cm
CC-901532	Hovedcelle, PU	85 x 10 cm
CC-901533	Hovedcelle, PU	90 x 15 cm
CC-901534	Hovedcelle, PU	105 x 10 cm
CC-9015341	Hovedcelle, PU	100 x 10 cm
CC-901535	Hovedcelle, PU	120 x 10 cm

Slangesett

Art.nr.	Beskrivelse	Art.nr.	Beskrivelse
CC-908054-200	Slangesett 200 cm	CC-908054-210	Slangesett 210 cm

CuroCell® A4 CX15

Toppdel Olivia CX15

Art.nr.	Storlek
CT141-080200-XX0000	80x200 cm
CT141-080210-XX0000	80x210 cm
CT141-085200-XX0000	85x200 cm
CT141-085210-XX0000	85x210 cm
CT141-090200-XX0000	90x200 cm
CT141-090210-XX0000	90x210 cm
CT141-100200-XX0000	100x200 cm
CT141-100210-XX0000	100x210 cm
CT141-105200-XX0000	105x200 cm
CT141-105210-XX0000	105x210 cm
CT141-120200-XX0000	120x200 cm
CT141-120210-XX0000	120x210 cm

Nederste del CuroCell CX15

Art.nr.	Størrelse
CB140-080200-XX0000	80x200 cm
CB140-080210-XX0000	80x210 cm
CB140-085200-XX0000	85x200 cm
CB140-085210-XX0000	85x210 cm
CB140-090200-XX0000	90x200 cm
CB140-090210-XX0000	90x210 cm
CB140-100200-XX0000	100x200 cm
CB140-100210-XX0000	100x210 cm
CB140-105200-XX0000	105x200 cm
CB140-105210-XX0000	105x210 cm
CB140-120200-XX0000	120x200 cm
CB140-120210-XX0000	120x210 cm

Madrass

Art.nr.	Beskrivelse	Størrelse
CC-901531	Hovedcelle, PU	80x10 cm
CC-901532	Hovedcelle, PU	85x10 cm
CC-901533	Hovedcelle, PU	90x10 cm
CC-901534	Hovedcelle, PU	105x10 cm
CC-9015341	Hovedcelle, PU	100x10 cm
CC-901535	Hovedcelle, PU	120x10 cm

Art.nr.	Beskrivelse	Størrelse
CC-901514	Sikkerhetscelle, PU	75 x 60 cm (for madrassbredde 80 cm)
CC-901512	Sikkerhetscelle, PU	80 x 60 cm (for madrassbredde 85 cm)
CC-901510	Sikkerhetscelle, PU	85 x 60 cm (for madrassbredde 90 cm)
CC-901515	Sikkerhetscelle, PU	95 x 60 cm (for madrassbredde 100 cm)
CC-901516	Sikkerhetscelle, PU	100 x 60 cm (for madrassbredde 105 cm)
CC-901518	Sikkerhetscelle, PU	115 x 60 cm (for madrassbredde 120 cm)
CC-901524	Sikkerhetscelle, PU	75 x 80 cm (for madrassbredde 80 cm)
CC-901522	Sikkerhetscelle, PU	80 x 80 cm (for madrassbredde 85 cm)
CC-901520	Sikkerhetscelle, PU	85 x 80 cm (for madrassbredde 90 cm)
CC-901525	Sikkerhetscelle, PU	95 x 80 cm (for madrassbredde 100 cm)
CC-901526	Sikkerhetscelle, PU	100 x 80 cm (for madrassbredde 105 cm)
CC-901528	Sikkerhetscelle, PU	115 x 80 cm (for madrassbredde 120 cm)
CC-901544	Sikkerhetscelle, PU	75 x 70 cm (for madrassbredde 80 cm)
CC-901542	Sikkerhetscelle, PU	80 x 70 cm (for madrassbredde 85 cm)
CC-901540	Sikkerhetscelle, PU	85 x 70 cm (for madrassbredde 90 cm)
CC-901545	Sikkerhetscelle, PU	95 x 70 cm (for madrassbredde 100 cm)
CC-901546	Sikkerhetscelle, PU	100 x 70 cm (for madrassbredde 105 cm)
CC-901548	Sikkerhetscelle, PU	115 x 70 cm (for madrassbredde 120 cm)

Slangesett

Art.nr.	Beskrivelse	Art.nr.	Beskrivelse.
CC-908075-200	Slangesett 200 cm	CC-908075-210	Slangesett 210 cm

Toppdel Stone CX15

Art.nr.	Størrelse
CT140-080200-XX0000	80x200 cm
CT140-080210-XX0000	80x210 cm
CT140-085200-XX0000	85x200 cm
CT140-085210-XX0000	85x210 cm
CT140-090200-XX0000	90x200 cm
CT140-090210-XX0000	90x210 cm
CT140-100200-XX0000	100x200 cm
CT140-100210-XX0000	100x210 cm
CT140-105200-XX0000	105x200 cm
CT140-105210-XX0000	105x210 cm
CT140-120200-XX0000	120x200 cm
CT140-120210-XX0000	120x210 cm

CuroCell® A4 CX16

Toppedel Olivia CX16

Art.nr.	Størrelse
CT122-080200-XX0000	80 x 200 cm
CT122-080210-XX0000	80 x 210 cm
CT122-085200-XX0000	85 x 200 cm
CT122-085210-XX0000	85 x 210 cm
CT122-090200-XX0000	90 x 200 cm
CT122-090210-XX0000	90 x 210 cm
CT122-100200-XX0000	100 x 200 cm
CT122-100210-XX0000	100 x 210 cm
CT122-105200-XX0000	105 x 200 cm
CT122-105210-XX0000	105 x 210 cm
CT122-120200-XX0000	120 x 200 cm
CT122-120210-XX0000	120 x 210 cm

Toppedel Stone CX16

Art.nr.	Størrelse
CT120-080200-XX0000	80 x 200 cm
CT120-080210-XX0000	80 x 210 cm
CT120-085200-XX0000	85 x 200 cm
CT120-085210-XX0000	85 x 210 cm
CT120-090200-XX0000	90 x 200 cm
CT120-090210-XX0000	90 x 210 cm
CT120-100200-XX0000	100 x 200 cm
CT120-100210-XX0000	100 x 210 cm
CT120-105200-XX0000	105 x 200 cm
CT120-105210-XX0000	105 x 210 cm
CT120-120200-XX0000	120 x 200 cm
CT120-120210-XX0000	120 x 210 cm

Nederste del CuroCell CX16

Art.nr.	Størrelse
CB120-080200-XX0000	80 x 200 cm
CB120-080210-XX0000	80 x 210 cm
CB120-085200-XX0000	85 x 200 cm
CB120-085210-XX0000	85 x 210 cm
CB120-090200-XX0000	90 x 200 cm
CB120-090210-XX0000	90 x 210 cm
CB120-100200-XX0000	100 x 200 cm
CB120-100210-XX0000	100 x 210 cm
CB120-105200-XX0000	105 x 200 cm
CB120-105210-XX0000	105 x 210 cm
CB120-120200-XX0000	120 x 200 cm
CB120-120210-XX0000	120 x 210 cm

Madrass

Art.nr.	Beskrivelse	Størrelse
CC-901531	Hovedcelle, PU	80 x 10 cm
CC-901532	Hovedcelle, PU	85 x 10 cm
CC-901533	Hovedcelle, PU	90 x 10 cm
CC-901534	Hovedcelle, PU	105 x 10 cm
CC-9015341	Hovedcelle, PU	100 x 10 cm
CC-901535	Hovedcelle, PU	120 x 10 cm

Slangesett

Art.nr.	Beskrivelse	Art.nr.	Beskrivelse
CC-908054-200	Slangesett 200 cm	CC-908054-210	Slangesett 210 cm

CuroCell® A4 CX20

Toppdel Olivia CX20

Art.nr.	Størrelse
CT102-080200-XX0000	80 x 200 cm
CT102-080210-XX0000	80 x 210 cm
CT102-085200-XX0000	85 x 200 cm
CT102-085210-XX0000	85 x 210 cm
CT102-090200-XX0000	90 x 200 cm
CT102-090210-XX0000	90 x 210 cm
CT102-100200-XX0000	100 x 200 cm
CT102-100210-XX0000	100 x 210 cm
CT102-105200-XX0000	105 x 200 cm
CT102-105210-XX0000	105 x 210 cm
CT102-120200-XX0000	120 x 200 cm
CT102-120210-XX0000	120 x 210 cm

Nederste del CuroCell CX20

Art.nr.	Størrelse
CB101-080200-XX0000	80 x 200 cm
CB101-080210-XX0000	80 x 210 cm
CB101-085200-XX0000	85 x 200 cm
CB101-085210-XX0000	85 x 210 cm
CB101090200-XX0000	90 x 200 cm
CB101-090210-XX0000	90 x 210 cm
CB101-100200-XX0000	100 x 200 cm
CB101-100210-XX0000	100 x 210 cm
CB101-105200-XX0000	105 x 200 cm
CB101-105210-XX0000	105 x 210 cm
CB101-120200-XX0000	120 x 200 cm
CB101-120210-XX0000	120 x 210 cm

Madrass

Art.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Art.nr.	Beskrivelse	Størrelse
CC-901410	Hovedcelle, PU	80 x 15 cm	CC-901420	Hælcelle, PU	80 x 13 cm
CC-901412	Hovedcelle, PU	85 x 15 cm	CC-901422	Hælcelle, PU	85 x 13 cm
CC-901414	Hovedcelle, PU	90 x 15 cm	CC-901424	Hælcelle, PU	90 x 13 cm
CC-901415	Hovedcelle, PU	100 x 15 cm	CC-901425	Hælcelle, PU	100 x 13 cm
CC-901416	Hovedcelle, PU	105 x 15 cm	CC-901426	Hælcelle, PU	105 x 13 cm
CC-901418	Hovedcelle, PU	120 x 15 cm	CC-901428	Hælcelle, PU	120 x 13 cm

Art.nr.	Beskrivelse	Størrelse
CC-901514	Sikkerhetscelle, PU	75 x 60 cm (for madrassbredde 80 cm)
CC-901512	Sikkerhetscelle, PU	80 x 60 cm (for madrassbredde 85 cm)
CC-901510	Sikkerhetscelle, PU	85 x 60 cm (for madrassbredde 90 cm)
CC-901515	Sikkerhetscelle, PU	95 x 60 cm (for madrassbredde 100 cm)
CC-901516	Sikkerhetscelle, PU	100 x 60 cm (for madrassbredde 105 cm)
CC-901518	Sikkerhetscelle, PU	115 x 60 cm (for madrassbredde 120 cm)
CC-901524	Sikkerhetscelle, PU	75 x 80 cm (for madrassbredde 80 cm)
CC-901522	Sikkerhetscelle, PU	80 x 80 cm (for madrassbredde 85 cm)
CC-901520	Sikkerhetscelle, PU	85 x 80 cm (for madrassbredde 90 cm)
CC-901525	Sikkerhetscelle, PU	95 x 80 cm (for madrassbredde 100 cm)
CC-901526	Sikkerhetscelle, PU	100 x 80 cm (for madrassbredde 105 cm)
CC-901528	Sikkerhetscelle, PU	115 x 80 cm (for madrassbredde 120 cm)
CC-901544	Sikkerhetscelle, PU	75 x 70 cm (for madrassbredde 80 cm)
CC-901542	Sikkerhetscelle, PU	80 x 70 cm (for madrassbredde 85 cm)
CC-901540	Sikkerhetscelle, PU	85 x 70 cm (for madrassbredde 90 cm)
CC-901545	Sikkerhetscelle, PU	95 x 70 cm (for madrassbredde 100 cm)
CC-901546	Sikkerhetscelle, PU	100 x 70 cm (for madrassbredde 105 cm)
CC-901548	Sikkerhetscelle, PU	115 x 70 cm (for madrassbredde 120 cm)

Slangesett

Art.nr.	Beskrivelse	Art.nr.	Beskrivelse
CC-908056-200	Slangesett 200 cm	CC-908056-210	Slangesett 210 cm

Strømtilførsel

Art.nr.	Beskrivelse
CC-8370-AUS	Strømforsyning, II, Australia (inkl. støpsel)
CC-8370-EU	Strømforsyning, II, Europa (inkl. støpsel)
CC-8370-UK	Strømforsyning, II, Storbritannia (inkl. støpsel)

Art.nr.	Beskrivelse
CC-8371	Støpsel, Europa, for CC-8370, elektrisk sikkerhetsklasse II
CC-8372	Støpsel, Storbritannia, for CC-8370, elektrisk sikkerhetsklasse II
CC-8373	Støpsel, Australia, for CC-8370, elektrisk sikkerhetsklasse II

Hvis du trenger andre reservedeler, kan du kontakte Care of Sweden eller forhandleren din.



Støpsel, Europa, II

11. Tilleggsutstyr og tilbehør

11.1 Ekstraustyr

Lakenholder

Holder lakenet på plass. Klips for feste til trekk, seks per madrass.

Lakeholder, enkeltvis

Art.nr.
CC-9075

11.2 Tilbehør

Solid transportveske

Art.nr.	Modell og størrelse
CC-9091	CuroCell® A4 OP10, 80–90 cm
CC-9093	CuroCell® A4 CX10, 80–90 cm
CC-9094	CuroCell® A4 CX10, 100–120 cm
CC-9094	CuroCell® A4 CX15, 80-90 cm
CC-9095	CuroCell® A4 CX15, 100-120 cm
CC-9094	CuroCell® A4 CX20, 80–90 cm
CC-9095	CuroCell® A4 CX20, 100–120 cm
58-900909	CuroCell® A4 CX16, 80–90 cm
58-900905	CuroCell® A4 CX16, 100–120 cm

11.3 Annet tilbehør

For beste komfort anbefaler vi bruk av tilbehør fra Care of Sweden, ettersom disse produktene er tilpasset til å fungere godt sammen.

Hvis du trenger tilbehør eller mer informasjon om produktene våre, kan du kontakte Care of Sweden eller se www.careofsweden.com.

12. Garanti

12.1 Omfang

Dette CuroCell®-systemet omfattes av en to års garanti mot produksjonsfeil. Garantien gjelder ikke normal slitasje eller skader som oppstår på grunn av uaktsom eller feilaktig håndtering/stell.

12.2 Produktets anbefalte levetid

Produktets estimerte levetid er 5 år.

13. Annen informasjon

13.1 Demontering og gjenvinning

Bortsett fra enkelte deler i kontrollenheten kan nesten alle materialer i CuroCell®-produkter energigjenvinnes i forbrenningsanlegg.

NB! Hvis det vurderes slik at produktet er eller kan være forurenset (for eksempel ved å ha blitt brukt av brukere med blodbåren infeksjon), må produktet tas hånd om i henhold til helsepersonellens eller de lokale myndighetenes rutiner for forurenset avfall.

Kontrollenhet:

Luftslangekoblingen (merket «CPR») kan enkelt demonteres, og den skal sorteres som «plastavfall». Resten av kontrollenheten skal ikke demonteres, og den skal sorteres som «elektronisk avfall».

Madrass:

En brukt CuroCell®-madrass skal leveres til resirkulering. Produktet sorteres under «brennbart avfall».

Care of Sweden overholder sitt produsentansvar ved å være tilknyttet Svenske Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) og El-Kretsen, et firma som leverer resirkuleringstjenester for elektrisk og elektronisk avfall. Kontakt Care of Sweden for mer informasjon.

13.2 Retur og garanti

Kontakt Care of Sweden før du returnerer produktet. Care of Sweden dekker returporto når feilen dekkes av garantien, ellers blir den belastet kunden.



Produsert av:

 care of sweden

Kontakt:

Telefon: +46 (0)771 106 600

Faks: +46 (0)325 128 40

E-post: export@careofsweden.se

Internett: www.careofsweden.com

Adresse:

Care of Sweden AB

P.O. Box 146

SE-514 23 Tranemo

SVERIGE

Leverert av:

puls
et selskap i Mediq

Puls as | Postboks 6608 Etterstad, 0607 Oslo | Tlf. 22 30 05 00
www.puls-norge.no | kundeservice@puls-norge.no