

VENDLET V5S

Verdig vending og forflytning
av sengeliggende





ARBEIDSMILJØ

PASIENTKOMFORT

RESSURSER

BRUK AV VENDLET BIDRAR TIL:

- Bedre arbeidsmiljø
- Bedre pasientkomfort
- Redusert arbeidsbelastning og sykefravær
- Redusert ressursbruk





HVA ER VENDLET?

VENDLET er den opprinnelige, komplette vendesystemet som sikrer enkle, sikre, verdige og komfortable vendinger og forflytninger for både den sengeliggende og medhjelper.

VENDLET består av en glidelaken, et trekkklaken, en håndkontroll og to motorvalser som er montert på hver side av sengen. Motorvalser heves og senkes enkelt med bruk av håndkontrollen som også styrer stramming/slakking av lakenet som komfortabelt og trygt vender og forflytter den sengeliggende.

Når motorvalsene er hevet, er VENDLET systemet samtidig en sengehest. Sengehestfunksjonene på på VENDLET V5S og VENDLET V5S + er testet og godkjent av det tyske testinstituttet TÜV.

HVA KAN JEG BRUKE VENDLET TIL?

- Vende den sengeliggende til sideleie, mageleie eller ryngleie i forbindelse med hygiene, undersøkelser, påkledning, legger på løfteseil osv.
- Forflytning av den sengeliggende fra side til side av sengen.
- Forflytte den sengeliggende høyere opp i sengen.

“Min mann er lammet i kroppen og kan ikke selv snu seg i sengen. VENDLET er et absolutt uundværlig hjelpemiddel som gjør det mulig for meg å ta vare på ham hjemme.”


Pårørende, Holbæk



ARBEIDSMILJØ

Med **VENDLET** bedres arbeidsmiljøet fordi:

- Pleieren skånes for fysisk belastning og tunge løft i forbindelse med håndteringen av den sengeliggende.
- Mere nærvær og verdighet øker trivsel for såvel pasient som pleier/medhjelper.

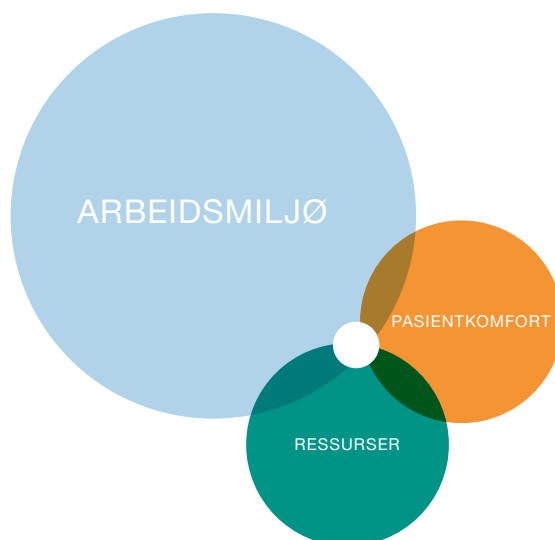

VISSTE DU AT...

- Helse- og sosialtjenester er den bransjen, som i 2012 hadde flest rapporterte belastningsskader.
- Innenfor helse- og sosialtjenester er det en markant overvekt av anmeldte ulykker innenfor kategorien "muskelskader".
- Antallet av anmeldte belastningsskader relatert til forflytning utgjorde 33% av anmeldelsene i 2012. Det er belastningsskader i skuldre, nakke, armer rygg og andre steder i muskel- og skjelettsystemet.


Kilde: Arbeidsskadestyrelsen i Danmark



PASIENTKOMFORT

Med **VENDLET** bedres pasientkomforten fordi:

- Den sengeliggende opplever en trygg og rolig vending, som er behagelig, idet lakenet understøtter kroppen i hele lengden.
- Pleieren har mulighet for å støtte den sengeliggende og sikre en korrekt og behagelig måte.
- Den sengeliggende føler seg ikke som en belastning for pleiepersonalet.

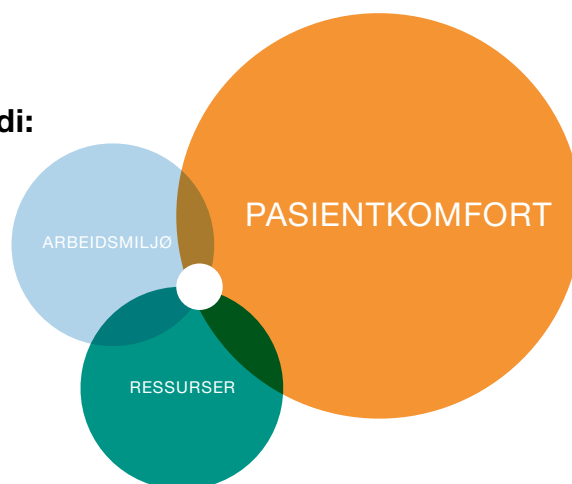

“Vendingen foregår stille og rolig og er derfor også behagelig for beboeren”.

Sikkerhetsrepresentant, Plejehjem, Brøndby Strand

VISSTE DU AT...

- God hvile øker den psykiske velvære og øker appetitten.
- Nye studier viser, at søvn er avgjørende for stoffskiftet og kroppens restitusjon.
- Manuelle forflytninger medfører ofte en negativ påvirkning av brukerens hud pga. høy friksjon.

*“Det beste med **VENDLET** er, at jeg blir vendt i ét stykke, fordi lakenet støtter hele kroppen”.*


Bruker, Århus



RESSURSER

Med VENDLET reduseres ressursforbruk fordi:

- Pleieren kan i større omfang jobbe trygt med pasienten, noe som forenkler organiseringen av daglige omsorgen
- Bruk av VENDLET medfører enklere arbeidsflyt som frigjør ressurser til andre oppgaver
- Bruken av VENDLET reduserer antall fraværsdager på de ansatte pga færre yrkesskader

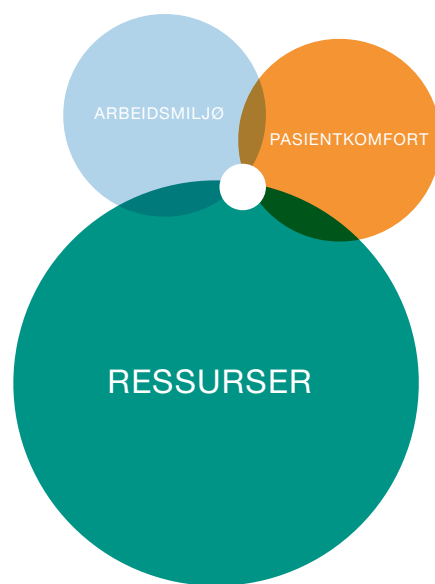

“VENDLET gjør livet lettere for oss fordi vi i større grad kan håndtere beboerne alene.”

SoSu assistent, Hjemmeplejen, Hjørring Kommune





MÅLGRUPPE

- Sengeliggende med få fysiske og/eller kognitive ressurser samt palliative pasienter
- Brukere/pasienter, med behov for pleie, påkledning, hjelp til hygiene mv. i sengen
- Brukere/pasienter som er plaget med trykksår ettersom den skånsomme og rolige forflytningen i lakenet minimerer friksjon og dermed shear. Shear kan som kjent forårsake skade på hud og vev og føre til trykksår.
- Brukere/pasienter med rom-/retningsforstyrrelser, da VENDLET ofte ses å ha en positiv effekt på denne pasientgruppe
- Sengeliggende overvektige brukere/pasienter

“Det er en tung oppgave at vende en beboer, som har begrenset mulighet for selv å hjelpe til. VENDLET er en stor hjelp i dette arbeide.”

Ergoterapeut, Træninscenter, Ishøj

VENDLET MODELLER

VENDLET V5S	Elektrisk vendelaken med integrert sengehest og hastighetsregulering	Max. brukervekt på 200 kg.
VENDLET V5S+	Elektrisk vendelaken med integrert sengehest og hastighetsregulering	Max. brukervekt på 400 kg.



KRAV TIL SENG

VENDLET er beregnet til montering på pleie- og sykehussenger godkjente i henhold til EN1970, EN60601-2-38 eller EN60601-2-52.

Sengen skal ha en rektangulær stålramme med en bredde på min. 20 mm, en lengde på min. 1950 mm og en høyde på 45-50 mm.

MADRASS

VENDLET fungerer på alle madrastyper, også vekseltrykkmadrasser.

INKONTINENS

VENDLET kan også brukes til inkontinente pasienter. Inkontinenslaget INKOLET kan med fordel brukes sammen med VENDLET.

LAKEN

Der skal benyttes både et trekkklaken og et glidelaken til VENDLET.

Vaskbare trekkklaken fås i følgende bredder: 350 cm (standard) / 400 cm / 450 cm

Vaskbare glidelaken fås i følgende bredder: 95 cm (standard) / 115 cm / 135 cm

Laknene fås også som engangslaken. Engangslaken fås kun i én bredde.

TILBEHØR

- Batteri backup
- Nattplys
- Forhøyerset for kombinasjon med særlig høye madrasser
- Avstandsstykker

Teknisk informasjon	VENDLET V5S	VENDLET V5S+
Varenummer	6100050	6100150
Maks brukervekt	200 kg	400 kg
Batteri (tilbehør)	1,2 AH, 24 V DC	1,2 AH, 24 V DC
Kontrollboks, håndkontroll og aktuatorer	IPX6	IPX6
Overensstemmelse	EU direktiv 93/42/EEC for medisinsk utstyr	EU direktiv 93/42/EEC for medisinsk utstyr