



# PLEIESENG QVINTETT 105 & 120

Funksjonelt arbeidsredskap med god liggekomfort



*at the heart of healthcare*

# QVINTETT 105 & 120

Qvintett 105/120 er en individuelt elektrisk regulerbar seng der alle sengens funksjoner styres fra et lett forståelig betjeningspanel. I tillegg til regulering av høyde, hjertebrett og bendel, gir sengen mulighet for et sitteleie med bendelen under horisontalen. Dette er spesielt egnet for personer som tilbringer mye tid i sengen.

Qvintett 105/120 er utstyrt med aktiv rygg der hjertebrettet trekkes tilbake når det heves for å redusere skyveffekten på rygg og seteparti, og dermed risikoen for ubehag og trykksår. En komfort-knapp regulerer liggeflaten til sitteleie eller planleie ved hjelp av ett trykk, uavhengig av hvordan liggeflaten er stilt inn i utgangs-

## Sidegrinder

Sengen leveres med integrerte sidegrinder som fungerer som sengeside når de er nedfelt. Sidegrinden senkes så langt ned at den ikke er i veien når bruker skal sitte på sengekanten. Sidegrindene har en pålitelig og kraftig konstruksjon og har automatisk sikkerhetslås. Standard grinder passer til en madrass på opp til 14 cm. Alternative grinder er tilgjengelig som tilbehør.

## Liggeflate

Sengens liggeflate er utstyrt med fjærende laminatpiler. Laminatpilene har en dokumentert trykkreduserende effekt på 16% i sittende stilling, sammenliknet med sengebunner i aluminium eller stål. Liggeflaten kan forlenges med inntil 20 cm.


## Arbeidsredskap

Sengen er et stabilt og godt arbeidsredskap for pleiepersonalet, samtidig som sengen gir brukere som ligger i sengen god liggekomfort og gode stillinger. Et stort utvalg tilbehør for økt aktivisering av bruker i og rundt sengen gir en bedre pleiehverdag. Qvintett 105/120 er produsert i henhold til sengenorm 60601-2-52.

## Vaskbar IP X6

Sengen er som standard klassifisert iht. IPx6 Washable. Det betyr at den kan vaskes i vaskemaskiner som er beregnet på senger.

SPESIFIKASJONER	105x200 cm	120x200 cm
Maks. brukervekt	185 kg	185 kg
SWL (Safe Working Load)	220 kg	220 kg
Yttermål, bredde	117 cm	132 cm
Yttermål, lengde	214 cm	214 cm
Madrassmål, bredde	105 cm	120 cm
Madrassmål, lengde	200 cm	200 cm
Sengebunn	4 delt	4 delt
Ryggdel, lengde	77 cm	77 cm
Setedel, lengde	20 cm	20 cm
Lårdel, lengde	37 cm	37 cm
Fotdel, lengde	56 cm	56 cm
Arbeidsområde (uten madrass)	33-82 cm	33-82 cm
Frigang under løfter	ca. 16 cm	ca. 16 cm
Hjuldiameter	100 mm	100 mm
Låsing av hjul	Sentralbrems retningsperre	Sentralbrems retningsperre
Vekt sengeløfter	56 kg	56 kg
Vekt sengebunn (eks. lår- og fotdel)	50 kg	58 kg
Vekt sengebunn lår- og fotdel	11 kg	12 kg
Totalvekt	117 kg	126 kg
Utførelse sengeramme	Lys bøk	Lys bøk
Lydnivå	47 dB	47 dB

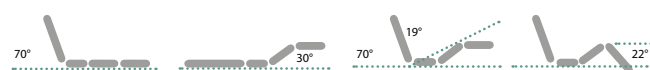

## Delbar

Sengen er som standard delbar i både sengebunn og sengeløfter, hvilket betyr at ingen del av sengen veier mer enn 32 kg.

## Quick Position System (QPS)

QPS gjør det mulig ved ett enkelt håndgrep å programmere liggeflaten og innstille sengen i en posisjon tilpasset for brukeren.

Dette kan med fordel benyttes når man vil sikre at den sengeliggende ligger i f.eks. Semi-Fowlers leie (30 graders vinkel i rygg og bendel).

## Planleie - ett trykk

Sengen kan med ett enkelt trykk settes i planleie, samt sitteleie, uavhengig av utgangsleie eller hvilke funksjoner som er innstilt fra før. Det er ofte svært viktig for brukeren av sengen å kunne sikre at sengen er i planleie.