

Consept Sittepute



Komfortabel sittepute

Consept Sittepute


Consept er en komfortabel og trykkfordelende sittepute som består av en anatomisk formstøpt base av polyuretanskum med innlegg av viskoelastisk skum fra oversiden. Utstyrt med sidestøtte, beindeler og sittegropp gir den stabil sittestilling til personer som trenger ekstra støtte.

Den anatomiske og tilpassede formen fordeler trykket mot lårenes underside, gir en god sittestilling, god avlastning for setemuskulene og redusert risiko for gnaging. Med uttak for ryggør og avrundet bakkant gir den også god passform i rullestolen. Concept har høy komfort og passer til personer som sitter over både lenger og kortere tid.

Consept har væsketett overflate som ikke slipper gjennom væsker og som er lett å rengjøre. Det medfølger et slitesterkt trekk av grå polyesterplysj med høy friksjon.

Ingen av Helab sitteputer og trekk inneholder bromerte flammebeskyttelsesmidler eller latex.

Andre størrelser enn de som er angitt her, kan leveres på bestilling. Kontakt vår kundeservice.

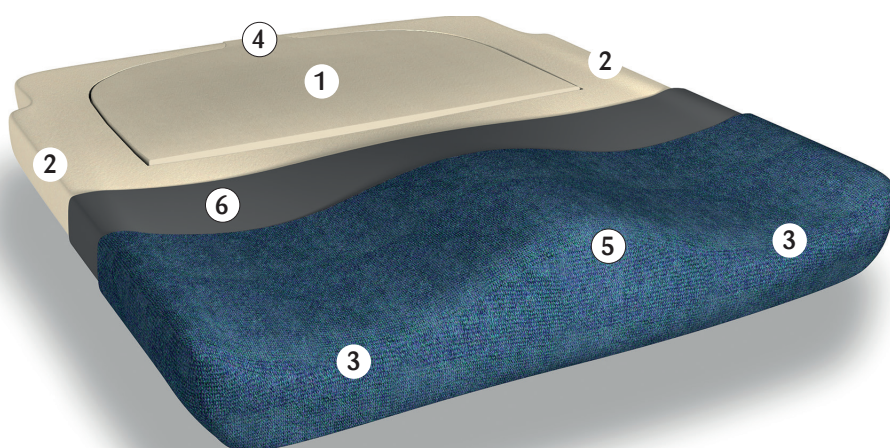

EGENSKAPER

- Anatomisk formstøpt
- Enkel å rengjøre
- Sittegropp **1**
- Lateralstøtte (sidestøtte) **2**
- Uttak for bein **3**
- Uttak for halebein **4**
- Beindeler **5**
- Væsketett overflate **6**

Fakta

Material i pute: Polyuretanskum, viskoelastisk skum, vulkanisert gummi

Material i trekk: Polyester/polyuretan

Høyde: 5 cm

Garanti: 2 år

Klassifisering: ISO-kode 18 10 06 – Trykkfordelende

Brann: Oppfyller ISO 7176-16

Tilbehør: Utjevningsplate



Les bruksanvisningen før produktet brukes.



Care of Sweden er et varemerke som tilhører Care of Sweden AB.
© Care of Sweden AB, 2017. Ettertrykk er forbudt. Sist oppdatert: 2017-06-09.

ANBEFALT MAKS. BRUKERVEKT I KG OG TILGJENGELIGE STØRRELSER

Dybde cm	Bredde cm								
	35	37	40	42	45	47	50	55	57
35	70								
40	70	105	115	130	130	130	150		
45	70	105	115	130	130	150	150	150	150
50			115	130	130	150	150	150	